



OBRAZOWANIE WEWNĄTRZUSTNE

DOŁĄCZ DO ŚWIATA JAKOŚCI OBRAZU



CHCESZ POZNAĆ Z BLISKA SYSTEMY
OBRAZOWANIA LUB INNE NAJNOWSZE
ROZWIĄZANIA W DZIEDZINIE STOMATOLOGII?
ODWIEDŹ SHOWROOM FIRMY SIRONA

Sirona Dental – biuro i salon pokazowy
Poleczki Business Park
ul. Poleczki 35, Warszawa
Tel.: 22 255 56 60
E-mail: biuro.poland@sirona.com

WWW.SIRONA.PL

The Dental Company

sirona.

HELIODENT^{PLUS}

HELIODENT^{PLUS} - najnowszej generacji aparat RTG do obrazowania wewnątrzustnego, całkowicie zaspokaja wymagania stawiane przez nowoczesną praktykę.

Kolory tła wskazujące stan urządzenia
Niebieski: gotowy do ekspozycji
Żółty: Ekspozycja w toku
Biały: Chłodzenie i serwis
Czerwony: Błąd

Wybór dawki promieniowania dla osoby dorosłej lub dziecka

Głowica lampy z podziałką kątową dla ułatwienia pozycjonowania

Wybór obszaru ekspozycji w obrębie szczęki, żuchwy lub ekspozycja skrzydłowo-zgryzowa

Indywidualne dostosowanie czasu ekspozycji

Wybór pomiędzy kliszą, a receptorem cyfrowym

DOSTĘPNE OPCJE INSTALACJI

- **Remote Timer**
Kontroluj ekspozycje z zewnętrznego pomieszczenia za pomocą timera.
- **Remote Control**
Uruchom ekspozycje z zewnątrz pomieszczenia za pomocą pilota.
- **Kontroler ręczny**
Z 3m spiralnym przewodem, aby uruchomić promieniowanie przy pacjencie z zachowaniem optymalnej odległości.

DOPASOWANY DO KAŻDEGO GABINETU

Ramię obrotowe zaprojektowano, aby maksymalnie ułatwić Twoją pracę. Dzięki możliwości wyboru spośród trzech jego długości, modelu montowanego na ścianie, na suficie lub w kombinacji z lampą LEDview, HELIODENT^{PLUS} dostosuje się do wymiarów dowolnego pomieszczenia.



5 LAT
GWARANCJI NA
SENSOR

XIOS XG Select i Supreme

OBRAZ W JAKOŚCI HD

Rozdzielczość 33,3lp/mm z sensorem XIOS Supreme

ŁATWA WYMIANA PRZEWODU

oszczędność dla Twojego gabinetu

OPCJA USB I WIFI

dla Twojej wygody

3 ROZMIARY SENSORÓW

o zaokrąglonym kształcie, dla komfortu Twoich pacjentów


XIOS XG Select

Ekonomiczna wersja sensorów XIOS XG, dająca możliwość wyboru między opcją WiFi i USB, wymiany przewodu oraz oferująca doskonałą jakość obrazu



XIOS XG Supreme

Najnowocześniejsza technologia obrazowania wewnątrzustnego w jakości HD.

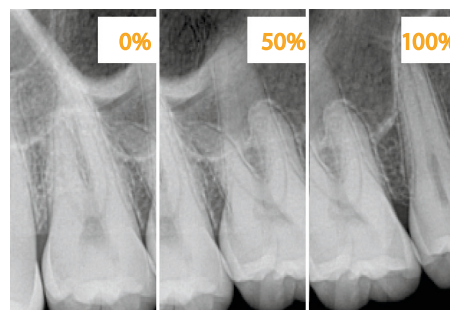

Dostosowany do Twoich potrzeb

XIOS XG Supreme oprócz najwyższej rozdzielczości, gwarantującej niezwykłą jakość obrazu pozwala wybierać pomiędzy:

- modułem WiFi, a USB,
- trzema rozmiarami sensorów o anatomicznym kształcie,
- różnymi długościami przewodów.

Jakość obrazu HD XIOS XG

Supreme osiąga teoretyczną rozdzielczość obrazu wielkości 33.3 lp/mm. Powłoka Csl, gwarantuje najniższy poziom szumu przy najlepszym kontraście.

Dynamiczny regulator ostrości

Dostosowanie indywidualnych ustawień ostrości, jasności i kontrastu dla 4 typów diagnozy za pomocą suwaka. Dzięki temu diagnozowanie stanie się jeszcze prostsze!



Prosta wymiana przewodu

Jeżeli przewód ulegnie uszkodzeniu, możesz go łatwo i szybko samodzielnie wymienić, unikając kosztów zakupu nowego sensora. Wystarczy odkręcić 2 śrubki.

Moduł WiFi


- beprzewodowa transmisja danych: system umożliwiający obrazowanie w różnych pomieszczeniach
- szybsza zmiana wielkości sensora
- bezpieczna klasyfikacja danych dzięki technologii RFID




Dane Techniczne

	HELIODENT ^{PLUS}
Generator	Wysokoczęstotliwościowy dla stałego wysokiego napięcia
Napięcie lampy	Regulowane między 60 kV a 70 kV
Prąd lampy	7 mA
Ognisko	0.4 (IEC 336)
Napięcie liniowe	120-240 V +/-10%, 50/60 Hz
Czas ekspozycji	Regulowane stopniowo od 0.01 do 3.2 s
Wyświetlacz	Wielokolorowy pokazujący różny status
Odległość ognisko-twarz	Standardowo 20 cm, opcjonalnie 30 cm
Dostępne opcje montażu	Ściana/sufit/sufit zLEDView/na unicie Intego, Intego Pro, Sinius, Teneo
Dostępne długości ramienia	410 mm/700 mm/950 mm


Dimensions for 950 mm (37 3/8") support arm

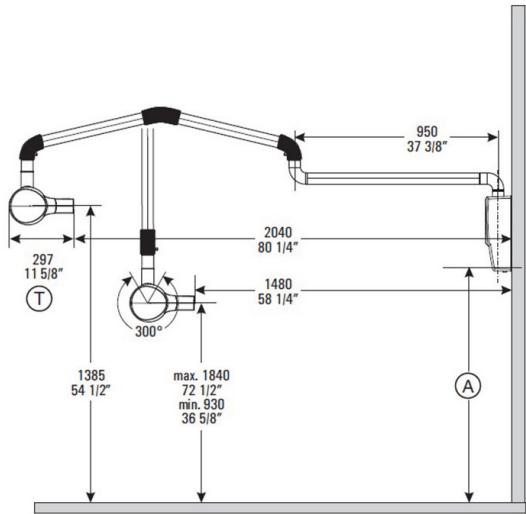

Dimensions for 700 mm (27 1/2") support arm

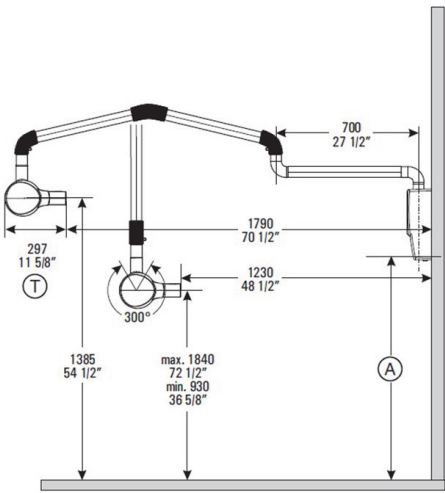

Dimensions for 410 mm (16 1/8") support arm

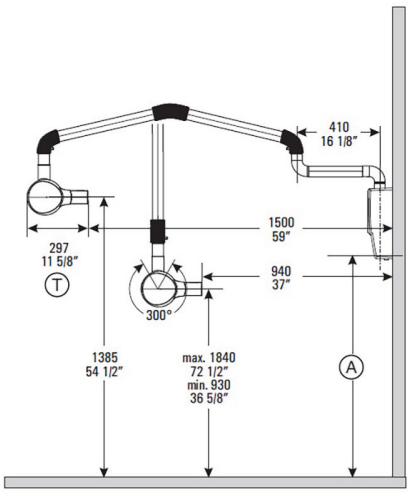

	XIOS XG SELECT	XIOS XG SUPREME
Sensory		
Sensor 0: aktywna powierzchnia	18x24mm	18x24mm
Sensor 0: ogólne wymiary	23.5x32x6.3mm	23.6x32x7.5mm
Sensor 1: aktywna powierzchnia	20x30mm	20x30mm
Sensor 1: ogólne wymiary	25.3x38.4x6.3mm	25.4x38.3x7.5mm
Sensor 2: aktywna powierzchnia	25.6x36mm	25.6x36mm
Sensor 2: ogólne wymiary	31.2x43.9x6.3mm	31.2x43x7.5mm
Rozmiar piksela	15µm	15µm
Rozdzielczość rzeczywista	16 Lp/mm	28 Lp/mm
Rozdzielczość teoretyczna	16.7 Lp/mm	33.3 Lp/mm
Moduł USB		
Port USB modułu USB	Wersja 2.0	Wersja 2.0
Moduł WiFi		
Technologia	IEEE 802.11b/g	IEEE 802.11b/g

XIOS Scan

NOWOŚĆ!

Nowy skaner płytek fosforowych XIOS Scan oferuje wszystkie korzyści cyfrowej technologii obrazowania RTG przy konwencjonalnym przepływie pracy. Razem z najnowszej generacji płytkami, gwarantuje uzyskanie najwyższej jakości obrazu.



NAJWYŻSZA
JAKOŚĆ
OBRAZU

ŁATWY
W
UŻYCIU


SOLIDNY
I
PEWNY



Doskonała jakość obrazowania:
rozdzielczość 22 lp/mm.



Osłony chroniące przed zagryzieniem dla
ochrony płytek oraz rękawy ochronne dla
najwyższych standardów higieny.

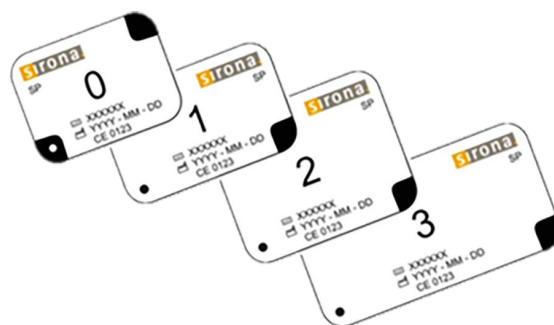

Płytki fosforowe w 4 rozmiarach.

PORTFOLIO PRODUKTÓW RTG

Nowości!



Orthohpos SL 3D



Orthohpos SL 2D



XIOS scan

Obrazowanie 3D



Orthophos XG 3D



Galileos Comfort/Comfort Plus

Obrazowanie 2D



Orthophos XG3



Orthophos XG5



Orthophos XG3D ready

Obrazowanie wewnątrzustne i sensory



Heliodent Plus




XIOS XG Supreme




XIOS XG Select

Oprogramowanie

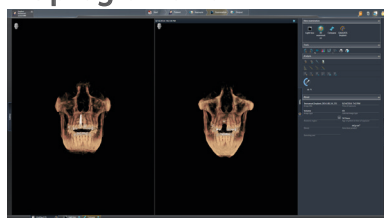

(2D/3D) Sidexis 4

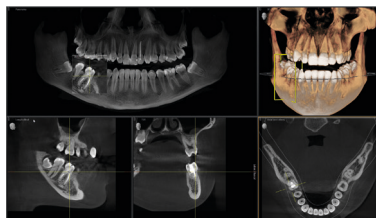

Galileos Implant