

A-dec 500



 a dec®

Co wyróżnia A-dec?



Różnica tkwi w szczegółach.

Gdy projektujemy, wytwarzamy lub testujemy produkt, zawsze zadajemy sobie pytanie „Co możemy zrobić lepiej?” Oznacza to zwracanie uwagi na szczegóły takie jak śruba, przewód czy szew. W efekcie wszystkie te drobiazgi robią dużą różnicę.




Unikalna budowa

Unikalny blok sterowania końcówkami firmy A-dec został opracowany z myślą o zdrowiu pacjenta. Czysta woda przepływa po każdej aktywacji końcówki, nie dopuszczając do jej zastoju w przewodach wodnych unitu.



Prawdziwa innowacja

Kończówki do dmuchawek firmy A-dec są wykonane z czystego mosiądzu i miedzi, aby były odporne na korozję i zawsze zapewniały niezawodną aseptykę.

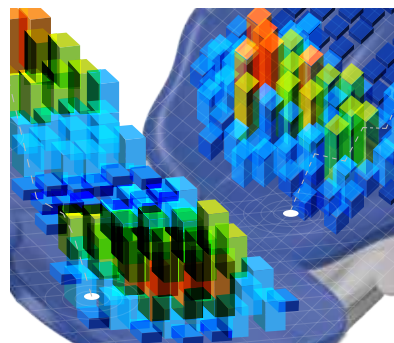

Wsparcie technologiczne

Badania z udziałem pacjentów wykorzystujące komputerową analizę nacisku ciała na fotel nie są jedynie deklaratywne, ale potwierdzone naukowo.



Przetestowane pod każdym względem

Zanim sprzęt trafi do seryjnej produkcji, prototyp jest poddawany najbardziej wymagającym testom trwającym aż do wystąpienia awarii.

Wydajność premium.
Najlepszy komfort.





Precyzja wykonania

Firma A-dec skrupulatnie wprowadza przejrzyste normy jakościowe i produkcyjne od początku do końca. Widać je już w projekcie. Potem przekłada się to na bezawaryjną i wydajną pracę stomatologa. I możesz na nich polegać przez cały czas trwania swojej praktyki.

Elastyczna integracja

Produkty firmy A-dec zaprojektowano tak, aby były trwałe, ale technologia ciągle zmienia się. Przyszłościowy elastyczny projekt musi zawierać możliwość bezproblemowego zainstalowania w konsolidacji najnowszej technologii.

Dogodny dostęp

Chodzi przede wszystkim o to, aby mieć dobry dostęp do pola zabiegowego i wygodny dostęp do wszystkich podzespołów unitu. Ultracienkie oparcie i zagłówki oraz profilowana podstawa fotela umożliwiają bliższe podejście do pacjenta i pracę w komfortowej, naturalnej pozycji

Rzeczywisty komfort

Czy komfort to odczucie czy pojęcie naukowe? To obie te rzeczy. W projektowaniu siedziska fotela A-dec 500 zastosowano skanowanie nacisku ciała pacjenta tak, aby zapewnić prawidłowe jego podparcie i komfort. Pacjenci mogą po prostu położyć się na fotelu i zrelaksować się.

Niezawodne elementy

Jeżeli Twój sprzęt nie działa, nie jest to Twój gabinet. Dzięki reputacji najlepszej jakości i historii najmniejszej liczby wezwań serwisu, fotel A-dec 500 jest inwestycją, która opłaca się w długim terminie.

Precyzyjnie zaprojektowany. Precyzyjnie wykonany.

Przemyślany projekt gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Bardzo ważne jest uwzględnienie wielu aspektów w trakcie projektowania. Nowoczesny design i rozwiązania niestandardowe nie mogą przesłaniać funkcjonalności i trwałości.



Sztuka inżynierska.

A-dec 500 zbudowano z myślą o produktywności i precyzji. Solidne wykonanie i inteligentne rozwiązania inżynierskie sprawiają, że A-dec 500 jest Nr 1 wśród dentystów co roku, od premiery w 2004.



Funkcje, na których można polegać.

W firmie A-dec, projektujemy i wytwarzamy własne części, dzięki czemu możemy kontrolować ich jakość. Nasz siłownik hydrauliczny fotela ma 10-letnią gwarancję i jest wykonany z założeniem 20-letniej pracy.



Estetyka i styl.

Przy projektowaniu siedziska zachowano krzywiznę lędźwiową tak, że pacjent jest równomiernie podparty. Jednocześnie siedzisko jest na tyle cienkie, że stomatolog ma bardzo dobry dostęp do pola zabiegowego.



Wygodne pozycjonowanie. Bezproblemowa integracja.

Prawdziwa integracja pozwala umieścić wszystko w zasięgu ręki. Konsoleta A-dec 500 płynnie integruje wszystko, czego potrzebujesz do wydajnej pracy, zapewniając komfort dla Ciebie i Twojego zespołu. Zastosowana technologia jest przyjazna tak, aby w przyszłości można było konsolę doposażać w nowe rozwiązania. W przypadku rodzaju konsoli, to Twój wybór: tylna, boczna lub Radius®.



Łatwo integruj urządzenia pomocnicze.

Bezproblemowo możesz podłączyć w konsolecie urządzenia kliniczne takie jak: kamera wewnątrzustna, skaler, lampa polimeryzacyjna czy mikrosilnik elektryczny.




Łatwy dostęp do pola zabiegowego.

Panel Deluxe zapewnia sterowanie lampą, funkcjami końcówek, fotelem, funkcjami splukiwania spluwaczki i napełniania kubka w intuicyjny sposób, jednym przyciskiem. Dzięki funkcji A-dec Relay dostępnej na panelu Deluxe (opcja) można zapewnić sterowanie urządzeniami pomocniczymi (np. załączanie klimatyzacji w gabinecie).



Pracuj z maksymalną precyzją.

Dzięki opcji sterowania suwakowym (dźwigniowym) sterownikiem nożnym pracą końcówek, delikatne, naturalne przesunięcie stopy zapewnia precyzyjną regulację prędkości końcówki. Przełączanie między trybem pracy z wodą i bez wody może odbywać się w sposób intuicyjny — bez odrywania oczu od pola zabiegowego.

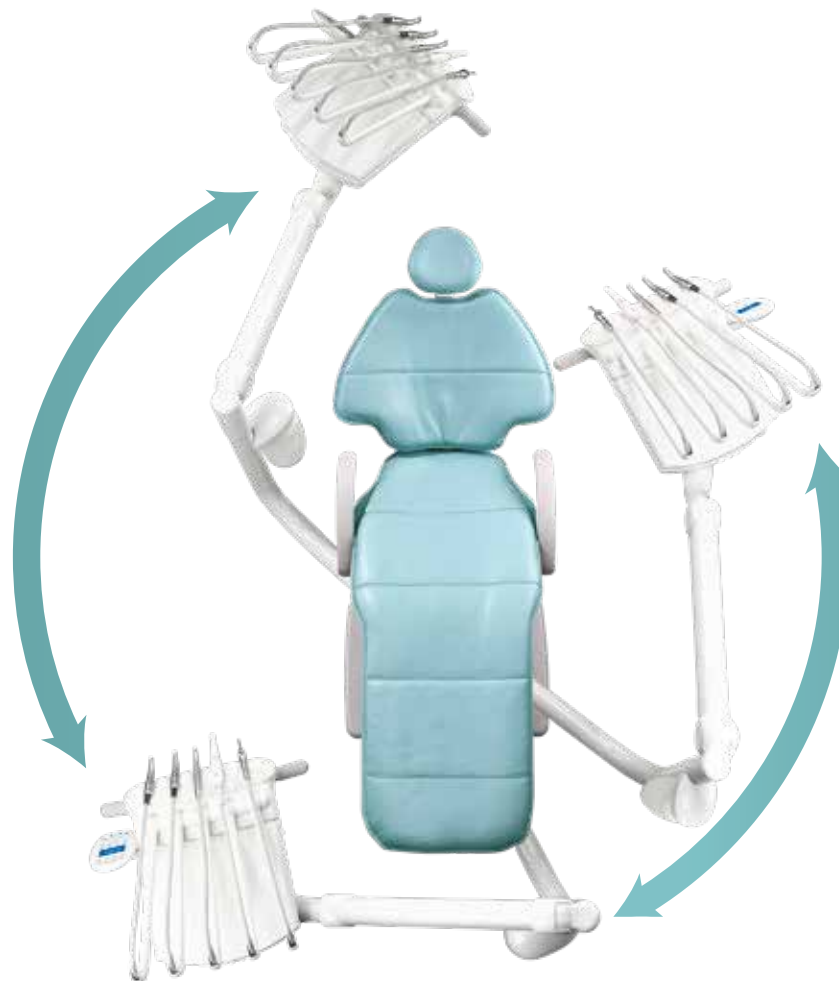

Pełna elastyczność.

Konsoleta Radius z możliwością lewo/prawostronnego ustawiania konsoly, sprawia, że stomatolog ma wszystko w zasięgu ręki. Zapewniany jest ruch i elastyczność.

Łatwy dostęp. Optymalna widoczność.

Uzyskaj lepszy widok pod dowolnym kątem. Bardzo ważnym aspektem pozycjonowania pacjenta do zabiegu jest również uwzględnienie zachowania jego wygodnej pozycji na fotelu, tak aby mógł wytrzymać nawet długotrwały zabieg. A-dec 500 zapewnia obie te rzeczy.






W efekcie wszystkie te drobiazgi robią dużą różnicę.

Ultracienkie oparcie i zagłówek pozwalają na pracę w komfortowej pozycji — nogi pod oparciem pacjenta, łokcie blisko tułowia.



Łatwa regulacja.

Podwójnie regulowany zagłówek z funkcją ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta zapewnia komfort i właściwe podparcie. Uzyskanie optymalnego dostępu do jamy ustnej jest tak łatwe, jak naciśnięcie dźwigni regulacji zagłówka.

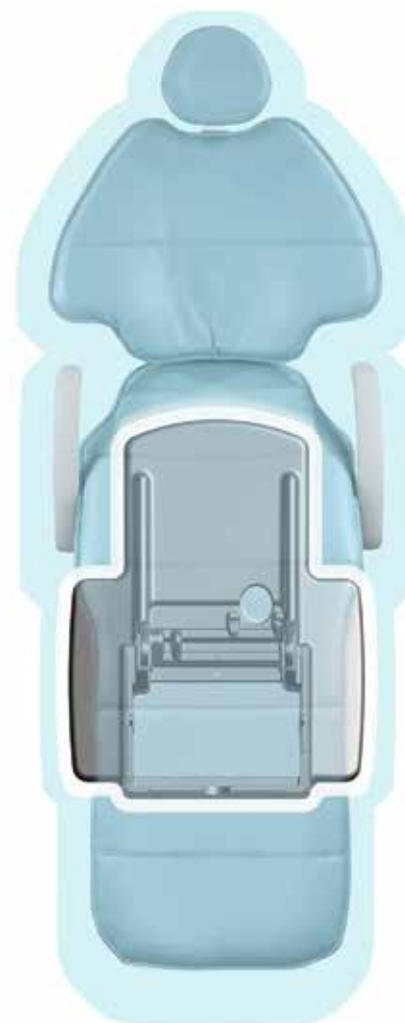

Profilowana podstawa.

Wcięcie w płycie podstawy umożliwia podjechanie stołkiem bliżej pacjenta. Dzięki sześciu punktom styku jest bardzo stabilna, nawet jeśli podłoga jest niewypoziomowana.



Intuicyjna ergonomia. Koncepcja zdrowia na długie lata.

Fizyczny komfort, gdy pracujesz (i gdy nie pracujesz). Statystyki pokazują, że organizm jest podatny na choroby zawodowe. Pamiętamy, że projektując każdy fotel i konsolę, stosujemy innowacje pomagające pracować wydajnie i skutecznie, a zarazem wygodnie. Wiemy, że liczy się dobre samopoczucie również po to, aby oddawać się swoim pasjom także poza godzinami pracy.



Dla każdego członka zespołu.

Regulowany, rozszerzony zakres wysokości od 800 mm (31,5 cala) umożliwiający obniżenie do 343 mm (13,5 cala). Każdy w Twoim zespole, niezależnie od wysokości, może wygodnie pracować.



Zachowaj zdrową postawę.

Dodaj doskonały stołek A-dec 500 w celu zapewnienia najlepszego komfortu podczas długotrwałej pracy siedzącej. Dzięki unikalnemu, dynamicznemu siedzisku z 4-ma strefami podparcia, stołek dopasowuje się do każdego ruchu stomatologa podczas pracy.



Bezproblemowe obracanie.

Funkcja obrotu 60° z hamulcem umożliwia jego obrót o 30° w każdą stronę, dzięki czemu można dogodnie pozycjonować pacjenta do konkretnego zabiegu.



Najnowsza interpretacja komfortu.

Tak wspierające i gładkie, że sprawiają wrażenie wykonanych na zamówienie.

Wiele cech fotela A-dec 500 sprawia, że pacjent czuje się na nim dobrze. Weźmy na przykład tapicerkę uwzględniającą równomierne podparcie ciała pacjenta. Redukując punkty nacisku, inżynierowie firmy A-dec zwiększyli komfort pacjenta w odniesieniu do jego całego ciała. Podczas zmiany pozycji, ruch kołyskowy fotela synchronizuje fotel z ruchem pacjenta w celu zapewnienia najlepszego komfortu.



Oparcie podtrzymujące głowę i szyję.

Dwuprzegubowy zagłówek, z funkcją ruchu tapicerki, porusza się wraz z głową pacjenta tak, aby zapewnić wygodne podparcie.



Łatwe wejście i zejście z fotela.

Wielopozycyjne podłokietniki można opuścić ułatwiając pacjentowi wejście i zejście z fotela.



Poczucie luksusu.

Innowacyjny system podnośnika hydraulicznego Comfort Ride zapewnia delikatne zatrzymywanie i uruchamianie podczas ustawiania pacjenta. Kołyskowy ruch siedziska i oparcia, który synchronizuje ruch z naturalnym ruchem pacjenta, zapewnia jego komfort po obniżeniu lub podniesieniu oparcia fotela.




Komfort bez przerw.

Komfortowe ułożenie się pacjenta na fotelu nie jest jego obowiązkiem. Jest to Twój obowiązek. Zaprojektowaliśmy fotel w ten sposób, aby był wąski wokół pola zabiegowego na godzinie 12 i nieco szerszy u dołu w celu podtrzymywania rąk/ramion pacjenta od momentu, gdy usiądzie.

Rozsądna inwestycja.

Gdy tracisz czas z powodu awarii, tracisz dochód. Firma A-dec wiele razy udowodniła niezawodność dzięki najmniejszej liczbie wezwań serwisu i przestojów. Jest to niezawodność, która opłaca się w długoterminowo.

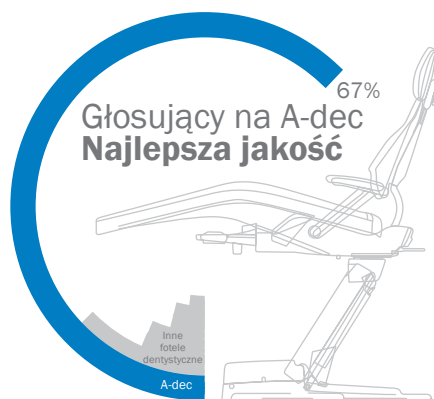


Najlepsza jakość

67% stomatologów ankietowanych w niezależnej ankiecie z 2015 r. głosowało na firmę A-dec jako najlepszą pod względem jakości.



Dodatkowa pewność

Elementy podnośnika hydraulicznego wykonują ciężką pracę więc dajemy na nie 10-letnią gwarancję.

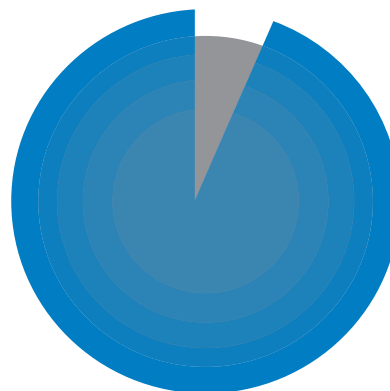


Zatwierdzone przez technikó serwisu

95% ankietowanych technikó serwisu wszystkich dostawców najbardziej polecałoby stomatologom firmę A-dec.



Uproszczona konserwacja

A-dec projektuje mając na myśli prostotę. Ponieważ inteligentny projekt zawierający mniejszą liczbę ruchomych części czyni produkty bardziej intuicyjnymi, obniżając jednocześnie ryzyko awarii. Można liczyć na prostszą konserwację i minimalizację wezwań serwisowych.

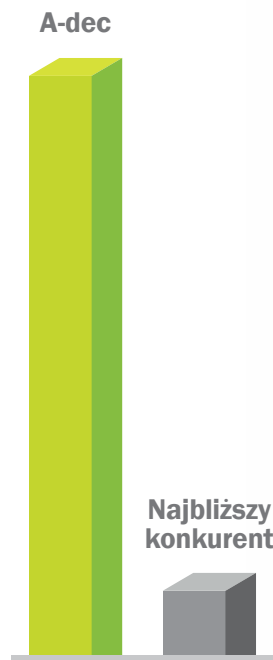

Niezawodność A-dec

Wszystkie fotele i sprzęt firmy A-dec mają 5-letnią gwarancję zapewniającą użytkownikowi spokój w trakcie eksploatacji. Jesteśmy partnerami przez cały czas trwania Twojej praktyki.

Najlepsza opłacalność długoterminowa

58% dentystów ankietowanych w niezależnej ankiecie z 2015 r. głosowało na firmę A-dec pod względem najlepszej opłacalności długoterminowej (kolejny najbliższy konkurent otrzymał 14% głosów).

To się opłaca

Sprzęt firmy A-dec jest zaprojektowany tak, aby działał bezawaryjnie, bez przestojów, podczas których tracisz dochód — dzięki temu masz pewność dobrego zainwestowania każdej złotówki.

Niezależne ankiety przeprowadzono we wrześniu 2015 r. z udziałem 201 dentystów w Stanach Zjednoczonych.

Pracuj w taki sposób, jak chcesz.

Opcje konszolety pozwalają wszystko umieścić w zasięgu ręki.



Nie widzę tego, nie myślę o tym. Konsoleta tylna

Gdy pacjenci wchodzą do gabinetu i widzą jedynie fotel - nie odczuwają dyskomfortu. Konsoleta tylna może być ustawiana dla lewo- i praworęcznych stomatologów. Jej dodatkową zaletą jest pozostawanie końcówek poza polem widzenia pacjenta.



Podejście minimalistyczne. Konsoleta boczna

Gdy pacjenci wchodzą do gabinetu, widzą tylko fotel klasy premium, konsoleta z końcówkami jest poza ich polem widzenia. Wszystko wygląda na logicznie uporządkowane i jednocześnie dostępne.



Wszędzie wokół ergonomiczny komfort. Konsola typu Continental

Doskonała równowaga. Mniejsze zmęczenie oczu. Ustawienie lewo- i praworęczne. Komfort pracy zapewnia odciążenie wagi końcówki i brak wstecznego naciągu.



Zintegrowane i opływowe. Konsola typu Traditional


Dzięki opcji ustawień lewo- i prawostronnych oraz możliwości integracji wielu końcówek i sprzętu dodatkowego, system Traditional zapewnia ergonomię i prostotę.

Elastyczne opcje.

Dostosuj do swojego środowiska.

Wielość konfiguracji.

Po wybraniu konsoli, czas na wybór panelu sterowania i zestawu końcówek. Pokazujemy niektóre popularne opcje, ale dostępne są setki rozwiązań.

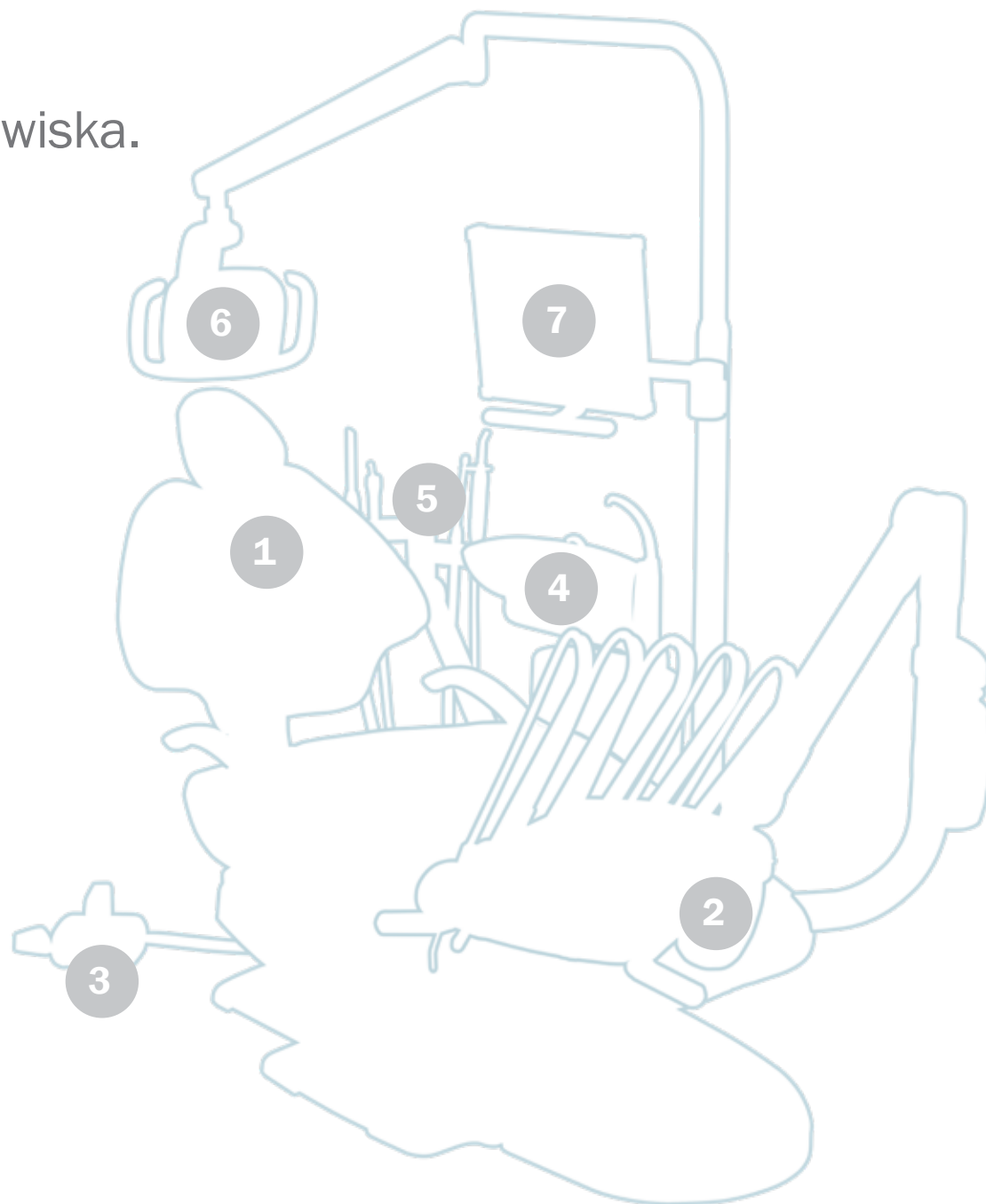



1 Tapicerka

Szwowa (górze) lub bezszwowa (dół)



2 Panel sterowania

Deluxe (górze) lub Standard (dół)



3 Sterowniki nożne pracą końcówek

Dźwignia sterownika pracą końcówek (u góry) lub funkcja pracy z wodą/bez wody z funkcją przedmuchu na końcówkach



4 Spluwaczki

Opcja



5 Konsoleta asysty

W pozycji na godzinie 12 (u góry) lub mocowane na fotelu (u dołu)



6 Lampy stomatologiczne

LED (górze) lub halogenowa (dół)



7 Ramiona do monitorów

Ramię typu Radius (pokazane) lub ramię mocowane do drążka lampy, ściany, szafki, sufitu lub szyny

Dwa style.
Opracowane dla komfortu.



Szwowa

Cienka, miękka, ręcznie szyta,
tapicerka z podwójnym ścięciem
zapewnia gabinetowi komfortowy
wygląd.

Bezszwowa

Gładka, bezszwowa tapicerka
doskonale pasuje do nowoczesnego
gabinetu.



Kolor i styl.

Wyróżnij Swój Gabinet.

Kolory bezszwowe



indigo



amethyst



sapphire




driftwood



sky blue



hazelnut

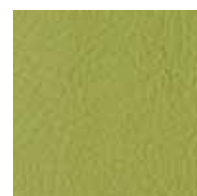


lemongrass



tawny



paprika

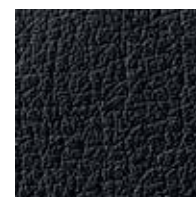

black

Kolory szwowe

Zamów próbki na stronie a-dec.com/InspireMe



cyan



sky



riviera



pacific



baltic



diplomat blue




lilac




plum




silver pearl

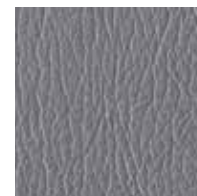

granite

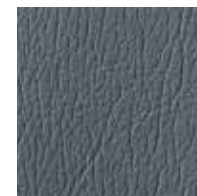


charcoal

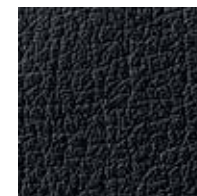

ebony




sea mist

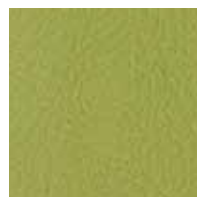

parrot



timberwolf

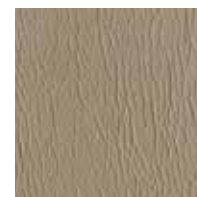

papyrus



sable



cave




lemon




arctic




chamois

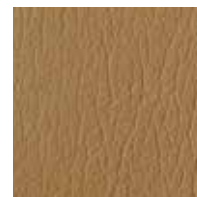

pecan

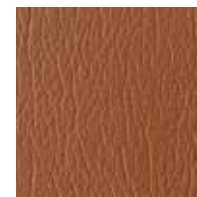

curry

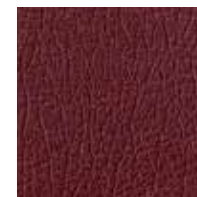

vintage




sassy



apricot



campfire

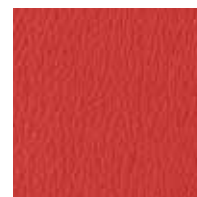

poppy



fuchsia



sorbet

Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

Dane techniczne

Fotel dentystyczny A-dec 511

Zakres wysokości podstawy	Punkt dolny: 343 mm (13,5 cala), 368 mm (14,5 cala) z podwójnym mocowaniem A-dec 300 Punkt górny: 800 mm (31,5 cala)
Oparcie	Ultracienki, elastyczny zagłówek o grubości 25 mm (1 cal)* (*na podstawie tapicerki bezzwowej)
Zagłówek	Dwuprzegubowy, z funkcją ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta, blokowany dźwignią
Podłokietniki	3-pozycyjne podłokietniki
Obrót fotela	60° (30° od środka do każdego boku)
Zasilacz	300 W
Sterowanie fotelem	Panel sterowania na konsolce lub sterownik nożny
System podnośnika	Napęd hydrauliczny z miękkim startem/zatrzymaniem
Rodzaj mocowania ramienia	Typu Radius lewo/prawostronnie Przystosowany do lewo- lub prawostronnego mocowania bloku spluwaczki/lampy
Warianty tapicerki	Szwowa lub bezzwowa
Obciążenie znamionowe UL	UL znamionowe do 181 kg (400 funtów) maksymalnego obciążenia pacjenta** (**obciążenie znamionowe opiera się na wymogach UL 4X (725 kg/1600 funtów) testu przeciążenia statycznego)

Blok przyłączeniowy

	Blok przyłączeniowy 561		Blok przyłączeniowy 461	
	Standard	Opcja	Standard	Opcja
Spluwaczka (z programowalnym napełnianiem kubka i splukiwaniem miski)	Ceramiczna miska spluwaczki		Ceramiczna miska spluwaczki	
Obracanie spluwaczki	±90°		±45°	
System wodny	Brak	Butelka 2 l	Brak	Butelka 2 l
Miejsce na separator amalgamatu		Tak (separator amalgamatu lub butelka na wodę)		Tak (separator amalgamatu lub butelka na wodę)
Rodzaj mocowania ramienia	Tylny przegub lewo/prawo		Tylny przegub lewo/prawo	
Mocowanie lampy/monitora	Nie	Tak	Nie	Nie

Lampy stomatologiczne

	lampa LED 500 ustawiana w 3-ch płaszczyznach	lampa halogenowa 500/6300 ustawiana w 3-ch płaszczyznach
Temperatura barwowa	5000 K	5000 K
Pole oświetlania	95 mm x 145 mm przy ogniskowej 700 mm (3,8 cala x 5,7 cala przy ogniskowej 27,6 cala)	85 mm x 160 mm przy ogniskowej 700 mm (3,3 cala x 6,3 cala przy ogniskowej 27,6 cala)
Natężenie oświetlenia (wybór trybu)	Niskie: 15 000 luksów Średnie: 25 000 luksów Wysokie: 30 000 luksów Niepolimeryzujące: żółte światło 25 000 luksów	Kompozytowe: 8000 luksów Średnie: 20 000 luksów Wysokie: 24 000 luksów
BTU na godzinę	24	325
Pobór mocy	15 W	95 W
Sterowanie oświetleniem	Panel sterowania, sterowanie manualne lub automatyczne dzięki funkcji wł./wyl. aktywowanej z panela	Panel sterowania, sterowanie manualne lub automatyczne dzięki funkcji wł./wyl. aktywowanej z panela
Oczekiwana żywotność źródła światła	>40 000 godzin	~2000 godzin (żarówka halogenowa)

Ramiona do monitorów

	A-dec 581 (blok spluwaczki)	A-dec 482	A-dec 381	A-dec 382 Radius
Możliwości pochylania	Z zaciskiem ruchomym	Z zaciskiem ruchomym	Z zaciskiem ruchomym	Z blokadą
Maksymalna waga płaskiego monitora	9 kg (20 funtów)	9 kg (20 funtów)	9 kg (20 funtów)	14 kg (31 funtów)
Pochylenie monitora	0–85°	±45°	±45°	±45°
Lokalizacja ramienia	Blok opcjonalny A-dec 561	Drażek lampy	Drażek lampy	Fotel (pojedynczy lub podwójny)

Konsolety lekarskie

	500 Radius (mocowanie konsolety pod siedziskiem fotela)		500 (mocowanie boczne do ściany)		500 w pozycji godziny 12		300 Radius (mocowanie konsolety pod siedziskiem fotela)	
Modele	A-dec 532 Traditional A-dec 533 Continental		A-dec 542 (mocowanie boczne do ściany)		A-dec 541 w pozycji godziny 12 (duo)		A-dec 332 Traditional A-dec 333 Continental A-dec 336 Traditional	
	Standard	Opcja	Standard	Opcja	Standard	Opcja	Standard	Opcja
Panel sterowania	Deluxe	Standard	Deluxe	Standard, brak	Deluxe	Standard, brak	Brak	Standard, Deluxe
Sterownik nożny	Z wodą/bez wody, z przedmuchem na końcówki (chip blower)	Dźwignia	Z wodą/bez wody, z przedmuchem na końcówki (chip blower)	Dźwignia	Z wodą/bez wody, z przedmuchem na końcówki (chip blower)	Dźwignia	Z wodą/bez wody	Z wodą/bez wody, z przedmuchem na końcówki (chip blower)
Przystosowanie do obsługi lewą/prawą ręką	Tak		Lewo- lub prawostronnie		Tak		Tak	
Liczba pozycji w uchwycie na końcówki	Traditional — 4 + dmuchawka Continental — 3 + dmuchawka	Dmuchawka z ciepłą wodą — 4 + dmuchawka (zawiera dodatkowe ramię końcówki)	Traditional — 4 + dmuchawka	Dmuchawka z ciepłą wodą	Traditional — 4 + dmuchawka	Dmuchawka z ciepłą wodą	Traditional — dmuchawka 3 + Continental — 3 + dmuchawka	4 + dmuchawka z ciepłą wodą
Rękaw końcówki	Silikonowy		Silikonowy		Silikonowy		Wynylowy	Silikonowy
Zasilacz światła do końcówek światłowodowych	Quad-volt		Quad-volt		Quad-volt		Brak	Quad-volt
System ramion	Wyważone ramię ruchome z hamulcem pneumatycznym		Wyważone ramię ruchome z hamulcem pneumatycznym		Manualna regulacja wysokości		A-dec 332 i 333 — Wyważone ramię ruchome z hamulcem pneumatycznym A-dec 336 — Manualna regulacja wysokości	
Opcje mocowania	A-dec 511		Preference Collection A-dec Inspire	Mocowane do ściany	Preference Collection A-dec Inspire, oddzielne		A-dec 311, A-dec 411	A-dec 511
Uchwyty hamulca	2		1		Brak		1	2
System wodny	Butelka 2 l		Butelka 2 l		Butelka 2 l		Butelka 2 l	
Integracja	457 cm (15 stóp) kabel USB 2.0 / do 3 modułów sterujących		457 cm (15 stóp) kabel USB 2.0 / do 3 modułów sterujących		457 cm (15 stóp) kabel USB 2.0 / do 3 modułów sterujących		457 cm (15 stóp) kabel USB 2.0 / do 2 modułów sterujących	

Instrumenty asysty

	Instrumenty asysty 551		System Duo 541 12 O'Clock		Instrumenty asysty 545 12 O'Clock	
	Standard	Opcja	Standard	Opcja	Standard	Opcja
Dmuchawka powietrze/woda	Dmuchawka z szybkim odłączaniem (QD)	Dmuchawka QD z ciepłą wodą	Dmuchawka QD	Dmuchawka QD z ciepłą wodą	Dmuchawka QD	Dmuchawka QD z ciepłą wodą
Panel sterowania	Standardowy panel sterowania		Brak	Standardowy panel sterowania	Brak	Standardowy panel sterowania
Końcówki ssące	1 x ślinociąg (SE) 1 x ssak (HVE)	Przewód EasyFlex, dodatkowy ssak HVE, dwa uchwyty	1 x ślinociąg (SE) 1 x ssak (HVE)	Przewód EasyFlex, dodatkowy ssak HVE, dwa uchwyty	1 x ślinociąg (SE) 1 x ssak (HVE)	Przewód EasyFlex, dodatkowy ssak HVE, dwa uchwyty
Przewód ssaka	Wynylowy	EasyFlex	Wynylowy	EasyFlex	Wynylowy	EasyFlex
Ustawianie	Regulacja pozioma	Regulacja pozioma i pionowa	Manualna regulacja pionowa		Manualna regulacja pionowa	
Lokalizacja ramienia	Ramię z tyłu fotela		Ramię przy meblu lub podłodze		Ramię przy meblu lub podłodze	











A-dec 300 | Kompaktowy
Zmysłowy
Elastyczny



A-dec 500 | Premium
Wyrafinowany
Niezawodny



A-dec 400 | Inteligentny
Wszechstronny
Wytrzymały



Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady
Faks: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australii

Tel: 1.800.225.010 z Australii
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

A-dec Chiny

Tel: +400.600.5434 z Chin
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

A-dec Wielkiej Brytanii

Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii



A-dec, the A-dec logo, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 500, A-dec 400, A-dec 300, A-dec 200, i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole stosowane na panelach sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Używanie tych symboli w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych materiałów i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

© 2017 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
85.6090.18/PP/500/12-17/RevG