


A-dec 300

a-dec<sup>®</sup>

# A-dec robi różnicę

## Trwałość na lata

W firmie A-dec zwracamy uwagę na każdy element, nawet śruby używane w naszych produktach. Dlatego większość naszych wyrobów produkujemy od początku z surowców; jest to czynnik decydujący o jakości. Te części mogą być niewidoczne, ale stanowią o trwałości, komforcie i funkcjonalności wszystkich produktów naszej marki. A dla Twojej działalności ma to kluczowe znaczenie.

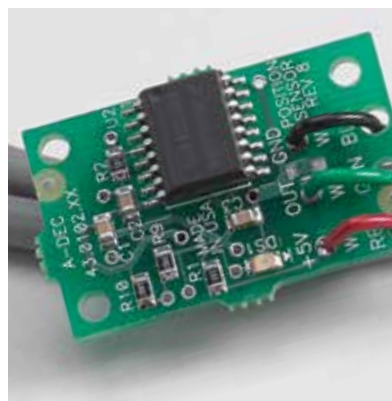

### **Blok sterowania końcówkami —**

Opatentowana konstrukcja sterująca rozdziałem czystej wody do zabiegów przy każdym uruchomieniu.

**Siłownik hydrauliczny** — Opracowany i skonstruowany przez firmę A-dec; trwała konstrukcja z mniejszą ilością części i 10-letnią gwarancją.

### **Czujnik położenia fotela —**

Technologia A-dec wykorzystuje, oprócz sterowania pneumatycznego, precyzyjne elektroniczne czujniki i sygnały cyfrowe.



Backed By  
**a dec**  
**5 YEAR**  
**WARRANTY**





# A-dec 300: Ewolucja

## Konstrukcja

Solidna płyta podstawy jest fundamentem trwałego fotela. Umieszczony na stabilnej podstawie fotel A-dec 300 pozwala w sposób cichy i płynny uzyskać pożądaną pozycję pacjenta za pomocą podnośnika, którego siłownik hydrauliczny wytrzyma 20 lat eksploatacji.

## Wartość

Zaprojektowany jako rozwiązanie modułowe, unit A-dec 300 jest kompleksowym systemem, umożliwiającym wybór właśnie tych funkcji, których potrzebujesz, przy zachowaniu odpowiedniego poziomu kosztów.

## Elastyczność

Wersja Traditional lub Continental — wybór należy do Ciebie. Bez względu na to, czy wybierzesz konsolę zamocowaną po lewej lub po prawej stronie, czy też konfigurację obrotową typu Radius®, końcówki i inne oprzyrządowanie znajdują się zawsze w Twoim zasięgu.

## Komfort

Technologia mapowania nacisku pacjenta na tapicerkę oraz ruch „kołyskowy” fotela zapewniają komfort i relaks pacjenta. Fotel pozwala wygodnie umieścić pacjentów o wadze do 181 kg (400 funtów).

## Dostęp

Gdy pacjent wygodnie opiera się na zagłówku z podwójną regulacją, masz do niego ergonomiczny dostęp dzięki zastosowaniu bardzo cienkiego oparcia o wąskim profilu. Ta kombinacja, będąca efektem naszego wieloletniego doświadczenia, zapewnia wygodną i komfortową pozycję pracy oraz ułatwia dostęp do jamy ustnej pacjenta.





# Ergonomiczny i ekonomiczny

Kto mówi, że najwyższy komfort jest nieosiągalny?  
Wyprodukowanie każdego fotela oraz stołka dentystycznego  
lub asysty poprzedzają lata badań, konsultacji, testów  
i ulepszeń. Stale analizujemy wszystkie profile, linie  
oraz kształty, aby upewnić się, że zapewniają najlepszą  
wydajność i komfort. Zapewniamy: Korzystny cenowo unit  
A-dec 300 nie jest tutaj wyjątkiem.

# Dostosuje się do Ciebie

Wersja z blokiem i konsolą mocowaną do podłogi (Pedestal) lub obrotowa (Radius) — wybór należy do Ciebie. W obu przypadkach końcówki znajdują się w zasięgu ręki i zapewniają bezproblemową obsługę pacjenta.



## **Blok spluwaczka/ konsola/lampa montowany do podłogi A-dec 300**

Konsole w wersji Traditional (rękaw od dołu) lub Continental (rękaw od góry) to kolejny Twój wybór. Przeznaczone dla lekarzy prawo- lub leworęcznych konsoly zapewniają łatwy dostęp do separatora amalgamatu oraz elegancko obudowanej skrzynki przyłączeniowej, która eliminuje nadmiar sprzętu znajdującego się na zewnątrz.



### **Unit A-dec 300 typu Radius**

Łatwa zmiana ustawienia dla operatorów prawo- lub leworęcznych. Pojedyncze lub podwójne mocowania typu Radius pozwalają na obrót konsoli, bloku spluwaczki i lampy dokoła przedniej części fotela w celu zapewnienia lepszego dostępu do pacjenta podczas zabiegu (lampa może być również mocowana na suficie lub ścianie).



### **Sterownik nożny**

Sterownik nożny A-dec zapewnia pełną kontrolę. Intuicyjna obsługa za pomocą przełącznika pracy z wodą/bez wody oraz przycisk wyboru przedmuchu/akcesoriów umożliwiają skupienie się na pacjencie bez odwracania wzroku. Minimalny ruch stopy wystarczy, aby uzyskać precyzyjną regulację elektrycznych i pneumatycznych końcówek.

# Tyle możliwości



Tapicerka szwowa z podłokietnikami



Traditional




Standardowy panel sterowania



Kołowy sterownik nożny



Tapicerka bezszwowa bez podłokietników

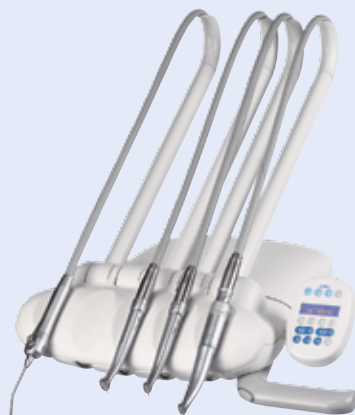

Continental



Panel sterowania Deluxe



Dźwigniowy sterownik nożny

## Tapicerka i podłokietniki

Wszystko zaczyna się od doskonałego fotela. Masz do wyboru wiele możliwości — od miękkiej szwowej lub łatwej w czyszczeniu bezszwowej tapicerki, po opcjonalne podłokietniki dwupozycyjne lub brak podłokietników.

## Konsolety

W jakie sposób pracujesz Ty i Twój zespół stomatologiczny? Zarówno do konsoli Traditional, jak i do konsoli Continental można podłączyć zasilacz do światła z czteropozycyjnym wyborem napięcia zasilania i dwa dodatkowe urządzenia.

## Panel sterowania

Uproszczona i szybka regulacja fotela, lamp dentystycznych i spluwaczki dzięki panelowi dotykowemu. Opcjonalny panel dotykowy w wersji deluxe umożliwia dodatkowo sterowanie zintegrowanymi urządzeniami klinicznymi, np. silnikami elektrycznymi, aparatami fotograficznymi i skalerami.

## Sterowniki nożne

Sterownik okrągły z funkcją przedmuchu końcówek lub, wielofunkcyjny sterownik A-dec zapewniający precyzyjną regulację elektrycznych i pneumatycznych końcówek.



Nieruchoma szklana spluwaczka



Obrotowa spluwaczka z porcelany

## Spluwaczki

Co wolisz — szkło czy porcelanę? Nieruchomą czy obrotową? Obie zdejmowane miski mają funkcje automatycznego napełniania kubka oraz spłukiwania.



Uchwyt 3-pozycyjny



Uchwyt 4-pozycyjny



Podwójny uchwyt 2-pozycyjny

## Panel asysty

Umieść narzędzia asysty tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Regulowane 3- lub 4-pozycyjne uchwyty są dostępne w wersjach mocowanych do fotela, spluwaczki lub na ramieniu teleskopowym.



A-dec 500 lampa halogenowa



A-dec 300 lampa LED



A-dec 500 lampa LED

## Lampy stomatologiczne

Bardzo ważne jest precyzyjne oświetlenie. Zarówno lampy LED, jak i lampy halogenowe zapewniają zrównoważone natężenie światła oraz jednolite pole oświetlenia bez niepożądanych cieni. Lampy automatycznie włączają i wyłączają się po ustawieniu fotela w pozycji wejścia lub zejścia pacjenta.



Mocowanie monitora Radius



Mocowanie monitora Light



Mocowanie monitora Light z ramieniem

## Mocowania monitorów

Konsultacja. Edukacja. Podgląd. Mocowania monitorów zapewniają widoczność w pozycji siedzącej oraz leżącej. Dobierz optymalne dla Ciebie opcje — płynne przechylenie lub blokowanie pozycji monitora, uchwyt do ustawiania pozycji monitora oraz różnorodne lokalizacje mocowania monitora.

## Tapicerka bezszwowa



Kolor ma duże znaczenie w tworzeniu odpowiedniej atmosfery. To dlatego firma A-dec oferuje szeroki zakres kolorów i opcji do zastosowania ze szwowymi i bezszwowymi tapicerkami.



**Zamów próbki na stronie**  
**[a-dec.com/InspireMe](http://a-dec.com/InspireMe)**

## Tapicerka szwowa



\* Kolory z krawędziami uzupełniające kolory bez krawędzi.

Rzeczywiste kolory mogą się różnić. Z próbkami kolorów i najnowszymi informacjami na temat produktów można zapoznać się u autoryzowanego dystrybutora firmy A-dec.

## Dane techniczne

### Fotel dentystyczny A-dec 300


|                                        |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres ruchu                           | Od 349 mm (13,75 cala) do 800 mm (31,5 cala); najniższy punkt 375 mm (14,75 cala) w wersji z dwiema opcjami montażu                                   |
| Cienkie, elastyczne oparcie fotela     | 32 mm (1,25 cala), tapicerka bezszwowa                                                                                                                |
| Układ napędowy                         | Napęd hybrydowy (elektromechaniczny dla oparcia i hydrauliczny dla siedziska)                                                                         |
| Wyłącznik ruchu oparcia i siedziska    | Tak, zatrzymuje ruch w dół w momencie wykrycia przeszkody w torze ruchu                                                                               |
| Zagłówek                               | Z podwójną regulacją, przesuwany (pokrętło)                                                                                                           |
| Zintegrowany zasilacz 300 W            | Tak                                                                                                                                                   |
| Panel sterowania lub przełącznik nożny | Oba opcjonalnie (panel sterowania jest dostępny w konsoletach)                                                                                        |
| Możliwość montażu                      | Ruchomy — na 5-centymetrowym (2 cale) drążku mocowanym do podstawy (tylko na rynki poza USA), lub typu Radius (pojedyncza lub podwójna opcja montażu) |
| Rodzaje tapicerek                      | Szwowa lub bezszwowa                                                                                                                                  |

### Konsolety

|                                                     | <b>A-dec 300 Continental</b>                                                                                                                                     | <b>A-dec 300 Traditional</b>                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blok sterowania końcówkami                          | Standardowy 3-pozycyjny, opcjonalny 4-pozycyjny                                                                                                                  | Standardowy 3-pozycyjny, opcjonalny 4-pozycyjny                                                                                                                                                                                       |
| Przystosowanie do obsługi lewą/prawą ręką           | Tak                                                                                                                                                              | Tak                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rękawy końcówek                                     | Winył lub silikon                                                                                                                                                | Winył lub silikon                                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba pozycji uchwytu na końcówki (poza dmuchawką) | 4                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uchwyt(y) hamulca konsoli                           | 1 standardowo, 2 opcjonalnie                                                                                                                                     | 1 standardowo, 2 opcjonalnie                                                                                                                                                                                                          |
| Opcje panelu sterowania                             | Brak, standard lub Deluxe                                                                                                                                        | Brak, standard lub Deluxe                                                                                                                                                                                                             |
| Czteronapięciowy zasilacz do światła                | Opcja                                                                                                                                                            | Opcja                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sterownik nożny pracą końcówek                      | Okrągły z funkcją przedmuchu końcówek lub wielofunkcyjny (dźwignia przesuwu)                                                                                     | Okrągły z funkcją przedmuchu końcówek lub wielofunkcyjny (dźwignia przesuwu)                                                                                                                                                          |
| System ramion                                       | Wyważone ramię ruchome wielopłaszczyznowo z hamulcem pneumatycznym<br>A-dec 333 — mocowanie typu Radius<br>A-dec 335 — mocowanie na nieruchomym bloku spluwaczki | Wyważone ramię ruchome wielopłaszczyznowo z hamulcem pneumatycznym<br>A-dec 332 — mocowanie typu Radius<br>A-dec 334 — mocowanie na nieruchomym bloku spluwaczki<br>Blokowanie ustawienia ręczne<br>A-dec 336 — mocowanie typu Radius |





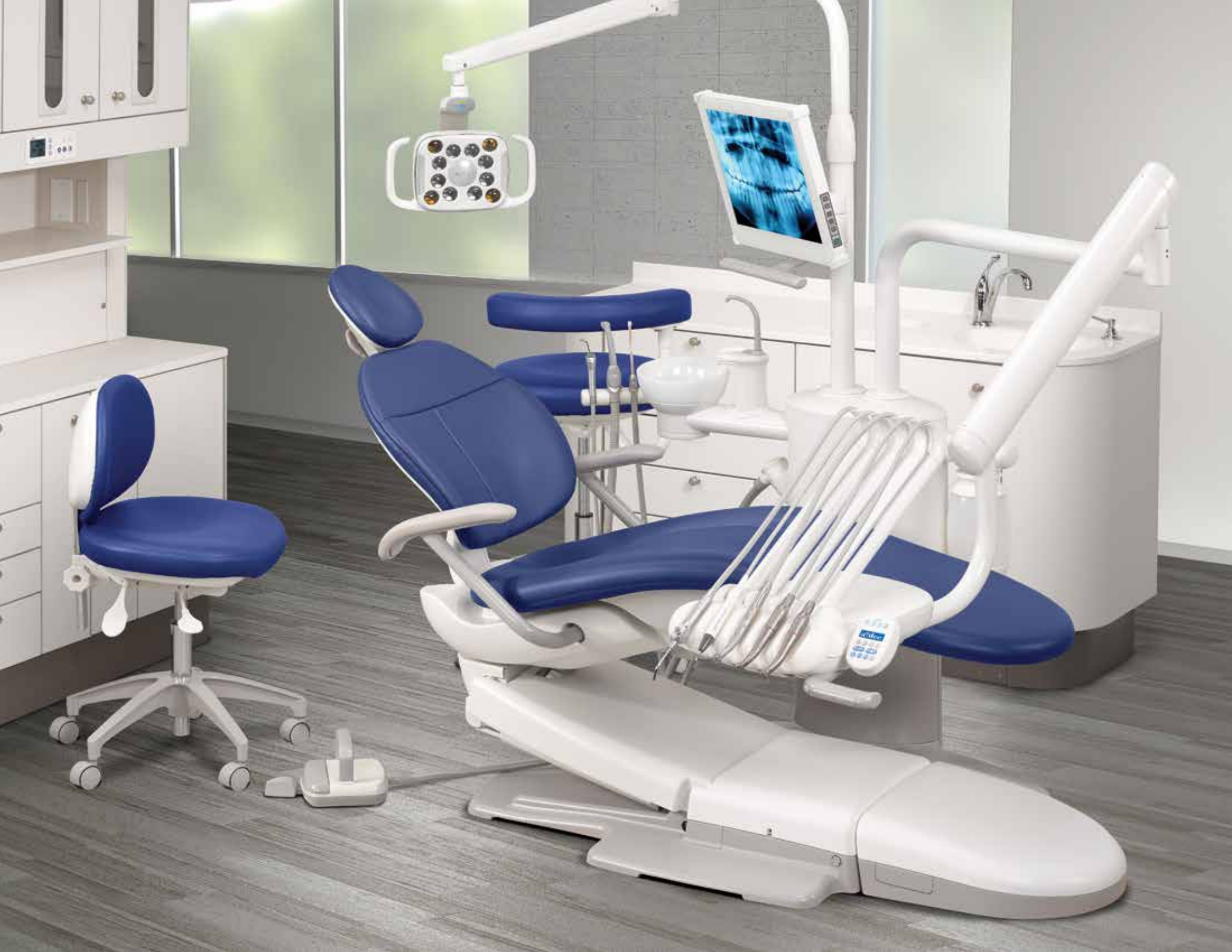



Objęty 5-letnią gwarancją.

# Poznaj rodzinę

Nasz kompleksowy asortyment sprzętu dentystycznego, od sztandarowego modelu A-dec 500 przez nowoczesny i uniwersalny A-dec 400 lub sprawdzony i korzystny cenowo A-dec 300, oferuje rozwiązania dopasowane do wszelkich potrzeb. Skontaktuj się z firmą A-dec, aby uzyskać więcej informacji na temat naszego asortymentu sprzętu dentystycznego.



## Siedziba firmy A-dec

2601 Crestview Drive  
Newberg, Oregon 97132 USA  
Tel: 1.800.547.1883 w USA/Kanadzie  
Tel: +1.503.538.7478 spoza USA/Kanady  
Faks: +1.503.538.0276  
a-dec.com

## A-dec Australii

Tel: 1.800.225.010 z Australii  
Tel: +61.(0)2.8332.4000 spoza Australii

## A-dec Chiny

Tel: +400.600.5434 z Chin  
Tel: +86.571.89026088 spoza Chinami

## A-dec Wielkiej Brytanii

Tel: 0800.233285 z Wielkiej Brytanii  
Tel: +44.(0).24.7635.0901 spoza Wielkiej Brytanii

A-dec, logo A-dec, A-dec Inspire, Cascade, Century Plus, Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC i Radius są znakami towarowymi firmy A-dec Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. A-dec 400, A-dec 500, A-dec 300, A-dec 200 i reliablecreativesolutions są również znakami towarowymi firmy A-dec Inc. Zabrania się powielania i kopiowania znaków towarowych oraz nazw handlowych zawartych w tym dokumencie, a także wykorzystywania ich w jakikolwiek sposób bez wyraźnej pisemnej zgody właściciela znaku towarowego.

Niektóre symbole znajdujące się na panelu sterowania są własnością firmy A-dec Inc. Jakiegokolwiek użycie tych symboli, w części lub w całości, bez pisemnej zgody firmy A-dec Inc. jest zabronione.

Kolory i produkty przedstawione w niniejszej broszurze mogą różnić się od rzeczywistych i mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. W celu zapoznania się z najnowszą ofertą oraz kolorystyką tapicerek zapraszamy do salonów autoryzowanych dystrybutorów firmy A-dec.

©2017 A-dec Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.  
85.6152.18/OP/1M/9-15(8-17)/Rev F2