


PRZEDNIO-POWIERZCHNIOWE


Widok przekrojowy

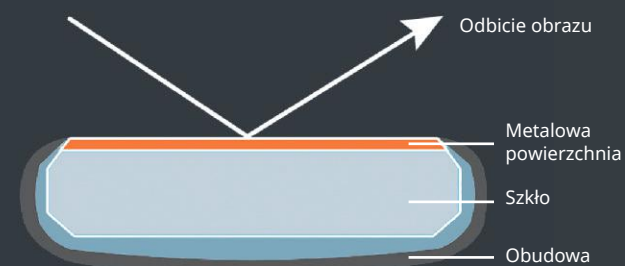

Obraz odbity bezpośrednio na powierzchni szkła,
bez zniekształceń
BRAK PODWÓJNEGO ODBICIA

TYLNO-POWIERZCHNIOWE

Widok przekrojowy
lusterka aluminiowego

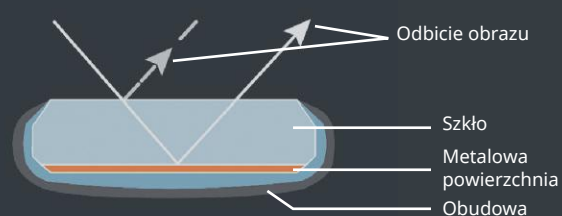

Powierzchnia odbijająca
pod powierzchnią szkła
PODWÓJNY OBRAZ



Wykończenie obudowy też ma znaczenie

Płaskie i ergonomiczne połączenie

Bardziej komfortowe dla pacjenta podczas odciągania policzka



ACTEON PRODONT-HOLLIGER



Konkurencja

Satynowane wykończenie

Zapobiega odbiciom światła
Zapobiega zmęczeniu oczu



Optymalne zaciski

Ramka jest idealnie spasowana z lustrem
Brak ostrych krawędzi
Krew i kurz się nie osadza



ACTEON PRODONT-HOLLIGER



Konkurencja

www.acteongroup.com

Zdjęcia:
1 - dzięki uprzejmości Dr Szalewskiego
2 - dzięki uprzejmości Dr Mendla

PRODONT-HOLLIGER | A Company of ACTEON Group
La Marnasse | 63880 OLLIERGUES | FRANCE
Tel + 33 (0) 473 955 642 | Fax + 33 (0) 473 955 699
E-mail : info@prodont-holliger.fr | www.acteongroup.com

ACTEON

PUREREFLECT
SEE THE TRUE IMAGE

JESTEM TWOIM
TRZECIM OKIEM


ACTEON

Not contractual document - Ref. D00125-V1 - 08/2018 - copyright © 2018 ACTEON®. All rights reserved. No information or part of this document may be reproduced or transmitted in any form without the prior permission of ACTEON®.

PURE REFLECT®

TECHNOLOGIA

wyłączna dla ACTEON PRODONT-HOLLIGER

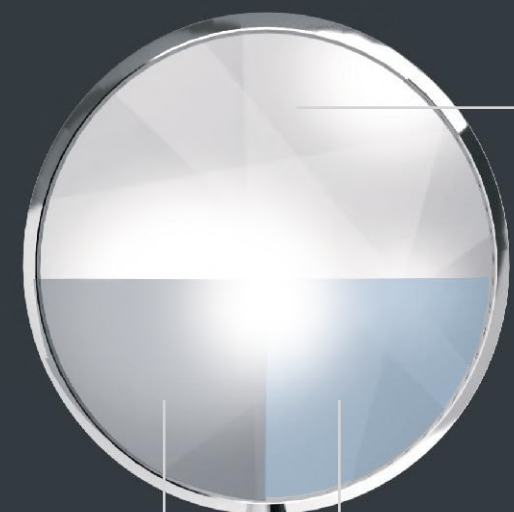

RODOWANE
szare odbicie

TYTANOWE
niebieskie odbicie

Inspirowane technologią kosmiczną

Brak podwójnego odbicia
(przednio-powierzchniowe)




Bardzo jasne



Brak deformacji kolorów czy kształtów
Dokładny i ostry obraz

Autentyczne odwzorowanie kolorów

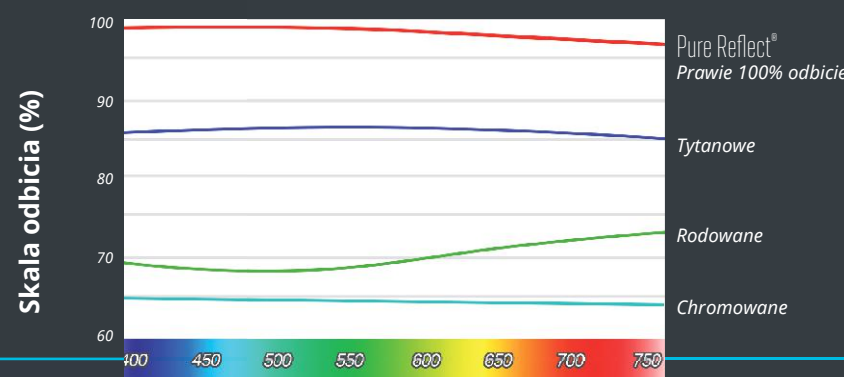


Widoczna długość fali (nm)
*źródło: laboratorium CNRS - Francja 12/2013

LUSTERKA WEWNĄTRZYSTNE

Od diagnostyki do leczenia, korzyści przy wszystkich zabiegach dentystycznych

Badanie wizualne jest pierwszym krokiem w diagnostyce.
Zasługujesz na prawdziwe odwzorowanie kolorów, bez zniekształceń

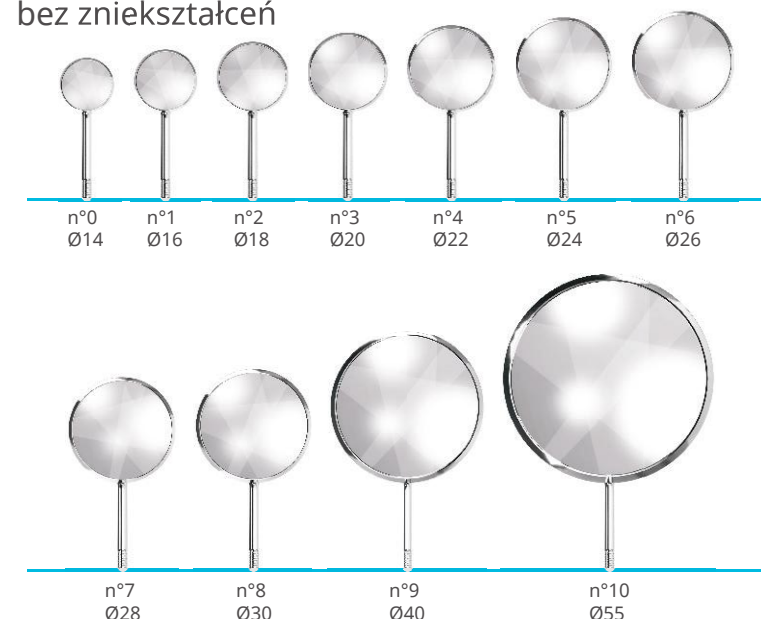

PURE REFLECT®



Konkurencja



1



Dr n. med. Leszek Szalewski Lublin

"Dzięki naturalnemu odwzorowaniu barw i niskiej absorpcji światła lusterka Pure Reflect doskonale sprawdzają się w fotografii stomatologicznej. Duży wybór rozmiarów i kształtów sprawia, że u każdego pacjenta możemy wykonać idealne zdjęcie. Lusterka Pure Reflect zastąpiły wszystkie lusterka, których używałem do tej pory".

LUSTERKA FOTOGRAFICZNE




Lek.stom. Piotr Mendel

"Wyjątkowa jasność i odwzorowanie kolorów pozycjonują lusterka Pure Reflect jako lidera na rynku fotografii stomatologicznej. Szczególnie w połączeniu z kątowym uchwytem dostępnym w ich ofercie."

Efektywna komunikacja z pacjentem

Poczuj różnicę z technologią
Pure Reflect®

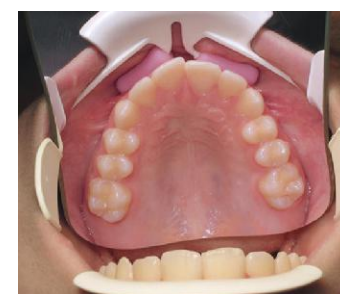

PURE REFLECT®



Tytanowe

- Chwal się zabiegami czy odbudową dla promocji kliniki
- Rób zdjęcia przypadków klinicznych do książek, publikacji czy kartoteki pacjentów

MIKRO LUSTERKA

Mikroskopijnie doskonale widoczne

- Ułatw sobie dostęp do wierzchołka
- Docień dokładną widoczność komory zęba
- Zachowaj miejsce w jamie ustnej: używaj instrumentów i mikro lusterek w sposób komfortowy



Optymalna widoczność cieśni



2









Occlusal



Vestibular



Lingual

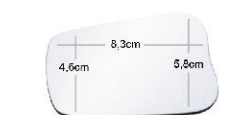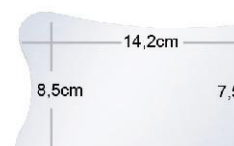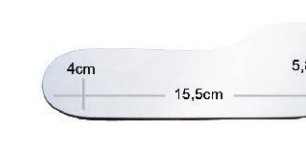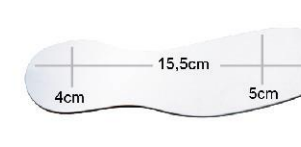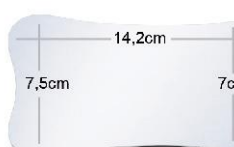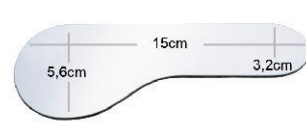

Wszystkie nasze lusterka są obustronne.
Wykonane są ze szkła.
Dostępnych jest 8 rozmiarów



Uchwyt

Trzymaj lusterko i
odciągaj policzek
jednocześnie