

WHITE DENTAL BEAUTY

PROFESSIONAL  
COMPO *Site* SYSTEM





# PROFESSIONAL COMPOSite SYSTEM

EDUCATED BY STYLE ITALIANO



White Dental Beauty Professional CompoSite System został stworzony, aby sprostać potrzebom pacjentów pragnących cieszyć się bielszym uśmiechem. Pozwala na osiągnięcie spektakularnych efektów w krótkim czasie.  
**Uznawany i polecany przez lekarzy zespołu Styleitaliano.**

Ten dedykowany system do odbudowy składający się z modyfikowanych odcieni i materiałów, powstał w oparciu o 25 lat badań i doświadczeń ponad 220 tysięcy członków Styleitaliano. Oferuje proste, przewidywalne efekty leczenia, które są minimalnie inwazyjne i niedrogie.

Jest alternatywą dla kosztownego i czasochłonnego zastosowania licówek porcelanowych.

White Dental Beauty Professional CompoSite jest kompatybilny z preparatami wybielającymi White Dental Beauty, oferując rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwaniom estetycznym pacjentów.



PROFESSIONAL  
COMPOSite  
SYSTEM

White Dental Beauty


PROFESSIONAL  
**COMPO** *Site*  
SYSTEM

Paleta kolorów White Dental Beauty CompoSite zawiera pięć odcieni bieli (**Si** 0, 0.5, 1, 2, 3) z optymalną gradacją kolorów do wybielanych oraz naturalnie białych zębów. Wprowadzenie odcienia **Si** 0,5 wypełniło lukę pomiędzy odcieniami 0 i 1, która często jest zbyt duża. Białe, żywe uśmiechy jakich oczekują pacjenci można uzyskać stosując jeden odcień kompozytu, a efekt może zostać ulepszony poprzez nałożenie cienkiej warstwy uniwersalnego materiału szklawego (0.5 mm), która dodaje witalności i świeżości, dzięki właściwościom opalizującym.



To idealny system do wykonywania odbudowy bezpośredniej uśmiechu, jak również do wykonywania pojedynczych odbudów w odcinku przednim oraz bocznym.

System kompozytowy działa w pełnej synergii z systemem wybielającym White Dental Beauty, którego zastosowanie jest polecane jako baza do uzyskania oczekiwanego, pięknego uśmiechu.

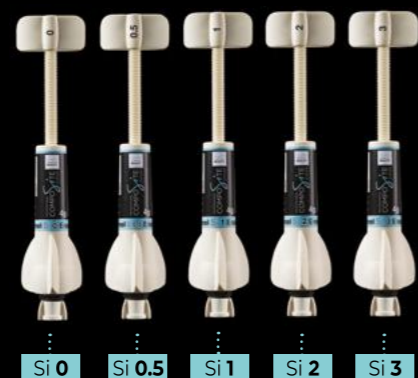

**Si 0** **Si 0.5** **Si 1** **Si 2** **Si 3**



**Si E Enamel** **Si P Posterior**



**Si M Masque** **Si MP Multiplo**

ODCIENI  
B I E L I

WYBRANE  
PRZEZ DENTYSTÓW  
DLA DENTYSTÓW

COMPO *Site* PALETA KOLORÓW

**Si 0, Si 0.5, Si 1, Si 2, Si 3**

CompoSite występuje w pięciu odcieniach bieli. Odcienie te zostały stworzone do przypadków wybielonych zębów oraz odbudowy. Perfekcyjnie dopasowują się do zębów wybielonych oraz naturalnie białych. Te multifunkcyjne odcienie mogą być stosowane w technice jednowarstwowej podczas wykonywania licówek bezpośrednich oraz w połączeniu z materiałem **Si E** w technice dwuwarstwowej.

**Si E** - Enamel (materiał szklawny)

Odcień szklawny idealnie łączy się ze wszystkimi odcieniami **Si**. Posiada odpowiednią transparentność oraz opalescencję. Odpowiedni do stosowania w technice dwuwarstwowej oraz do charakteryzacji okolicy brzegu siecznego.

**Si M** - Masque, **Si MP** - Multiplo

Kompozyty typu flow. **Si M** wykorzystuje opakowaną żywicę, która kamufluje odcień naturalny zęba. Idealnie sprawdza się w przypadku zaburzeń koloru zębów oraz maskuje ciemne zęby przy użyciu jednej warstwy. Zapewnia neutralną bazę umożliwiającą natychmiastowe wykonanie odbudowy bezpośredniej. **Si MP** to materiał mający wiele zastosowań. Może być stosowany jako baza/materiał podkładowy, w ubytkach klasy V, do obudowy zębów oraz do cementowania licówek i overlay.

**Si P** - Posterior

Kompozyt do odcinka bocznego posiada homogenne zabarwienie, posiada właściwości rozpraszania światła, uniwersalną opakowość i dopasowuje się do zabarwienia zęba, sprawiając że jeden odcień można zastosować w większości przypadków. 80 % zawartości materiału stanowi wypełniacz. Materiał jest przeznaczony do stosowania w technice Fast Modelling (FMT). Jego właściwości upraszczają proces modelowania i odtwarzania anatomii powierzchni okluzyjnej, zapewniając długi czas pracy. Odporny na ścieranie i łatwo polerowalny.

Materiał CompoSite posiada odpowiednią lepkość, zapewniając w ten sposób łatwość pracy. Posiada odpowiednią konsystencję idealną do modelowania. Dobrze polerowalny, dzięki czemu odbudowy wykonane materiałem są praktycznie niewidoczne, w jamie ustnej zapewniając oczekiwany efekt estetyczny.

SKUTECZNE I UNIKALNE  
MATERIAŁY



# WHITE DENTAL BEAUTY COMPOSITE



ZESTAW STRZYKAWEK WHITE DENTAL BEAUTY COMPOSITE


1x 4 g strzykawka <b>Si 0</b>	1x 4 g strzykawka <b>Si E</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 0.5</b>	1x 4 g strzykawka <b>Si P</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 1</b>	1x 1.8 g strzykawka <b>Si M</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 2</b>	1x 1.8 g strzykawka <b>Si MP</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 3</b>	20x aplikator



ZESTAW TIPSI WHITE DENTAL BEAUTY COMPOSITE

15x 0.25g <b>Si 0 TipSi</b>	15x 0.25g <b>Si E TipSi</b>
15x 0.25g <b>Si 0.5 TipSi</b>	15x 0.25g <b>Si P TipSi</b>
15x 0.25g <b>Si 1 TipSi</b>	1x 1.8g strzykawka <b>Si M</b>
15x 0.25g <b>Si 2 TipSi</b>	1x 1.8g strzykawka <b>Si MP</b>
15x 0.25g <b>Si 3 TipSi</b>	20x aplikator

Strzykawka White Dental Beauty została zaprojektowana w sposób ergonomiczny, aby umożliwić otwieranie przy pomocy jednej ręki.

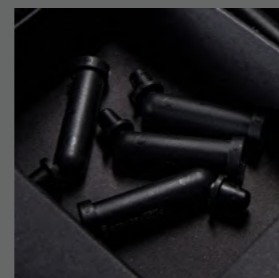

UZUPEŁNIENIA

COMPOSITE

1x 4 g strzykawka <b>Si 0</b>	1x 4 g strzykawka <b>Si 3</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 0.5</b>	1x 4 g strzykawka <b>Si E</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 1</b>	1x 4 g strzykawka <b>Si P</b>
1x 4 g strzykawka <b>Si 2</b>	

COMPOSITE FLOW

1x 1.8 g strzykawka <b>Si M</b> Masque	1x 1.8 g strzykawka <b>Si MP</b> Multiplo
--	---

TIPSI

15x 0.25 g <b>Si 0 TipSi</b>	15x 0.25 g <b>Si 3 TipSi</b>
15x 0.25 g <b>Si 0.5 TipSi</b>	15x 0.25 g <b>Si E TipSi</b>
15x 0.25 g <b>Si 1 TipSi</b>	15x 0.25 g <b>Si P TipSi</b>
15x 0.25 g <b>Si 2 TipSi</b>	




## INTELIĞENTNY DOBÓR ODCIENIA

MIKROHYBRYDOWY WYSOKOESTETYCZNY MATERIAŁ COMPOSITE- DANE TECHNICZNE

Zawartość wypełniacza	80.0 w / w %	DIN 51081
Skurcz polimeryzacyjny	2.0 %	Uniwersytet w Manchesterze
Wytrzymałość na zginanie	120 MPa	ISO 4049
Absorpcja wody	18.4 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Rozpuszczalność w wodzie	1 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Wytrzymałość na ściskanie	375 MPa	ISO 9917
Twardość pow. mat. (Micro-Vickers Hardness)	99 MHV	Uniwersytet w Rostock
<b>Głębokość naświetlania (&gt;500 mW/cm<sup>2</sup>)</b>		
Przezierność	> 2.5 mm / 10 s	ISO 4049
Opakerowość	> 2.0 mm / 40 s	ISO 4049
Radioopakerowość	210% AI	ISO 4049

(-GU) Polerowalność w jednostkach odbicia (RE)

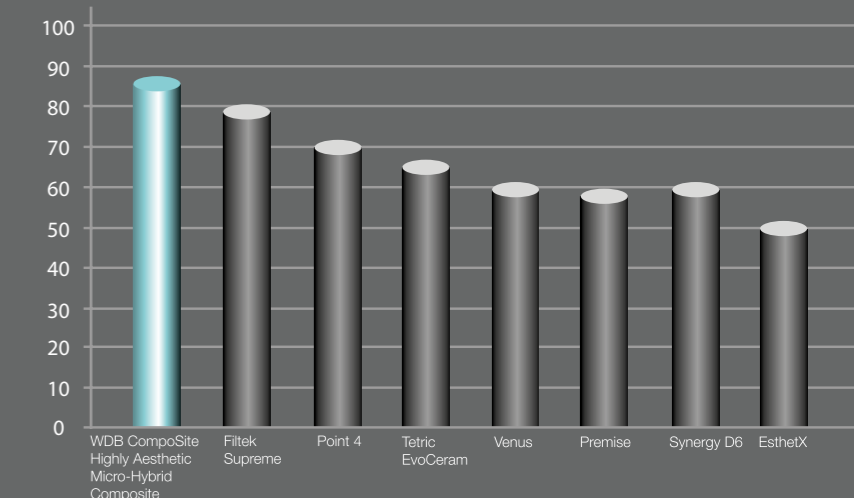

Polerowalność w jednostkach odbicia (RE) zgodne z ISO 2873 with polisher from White Dental Beauty Material GmbH 2007  
Filtek Supreme, Point 4, Tetric EvoCeram, Venus, Premise, Synergy D6, EsthetX nie są znakami towarowymi należącymi do White Dental Beauty.

MIKROHYBRYDOWY WYSOKOESTETYCZNY MATERIAŁ COMPOSITE TYPU FLOW- DANE TECHNICZNE

Zawartość wypełniacza	64.0 w / w %	DIN 51081
Wytrzymałość na zginanie	115 MPa	ISO 4049
Absorpcja wody	27.6 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Rozpuszczalność w wodzie	< 1.6 $\mu\text{g} / \text{mm}^3$	ISO 4049
Wytrzymałość na ściskanie	367 MPa	ISO 9917
<b>Głębokość naświetlania (&gt;500 mW/cm<sup>2</sup>)</b>		
Przezierność	> 3.0 mm / 10 s	ISO 4049
Opakerowość	> 1.5 mm / 40 s	ISO 4049
Radioopakerowość	190% AI	ISO 4049



P R Z Y P A D K I



MURAD AKHUNDOV  
ODCINEK BOCZNY

Dr Murad Akhundov jest absolwentem Wydziału Stomatologii Azerbejdżańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2012 roku ograniczył swoją praktykę do specjalizacji w stomatologii adhezyjnej i estetycznej.

W 2013 roku wygrał konkurs w Pizie organizowany przez StyleItaliano

Dr Akhundov jest członkiem honorowym międzynarodowej grupy StyleItaliano i posiada wiele publikacji w międzynarodowych czasopismach.

Jako uznany specjalista stomatologii estetycznej, wykłada w Dental Revolution w prywatnej klinice oraz w centrum edukacyjnym.



THIAGO OTTOBONI  
ODCINEK PRZEDNI

Dr Thiago Ottoboni jest absolwentem UNIMAR Universidade de Marília, tytuł mastera uzyskał UnG w Brazylii. Później ograniczył swoją praktykę do specjalizacji w stomatologii odtwórczej na Universidade Norte do Paraná- UNOPAR.

Jest dumny z faktu, że jest srebrnym członkiem grupy StyleItaliano z prywatną kliniką w Blumenau w Brazylii i profesorem w Instituto IPPO. Jako uznany autor napisał wiele rozdziałów książek i artykułów na temat stomatologii odtwórczej.



MONALDO SARACINELLI  
ODCINEK PRZEDNI

Dr Monaldo Saracinelli był uczniem Prof. Fabio Toffenetti i Riccardo Garberoglio i został nauczycielem akademickim z zakresu stomatologii zachowawczej w Instituto Policattedra di Discipline Odontostomatologiche Università degli Studi Di Siena w 1986 roku. Następnie podjął się roli wykładowcy dla techników dentystycznych z zakresu stosowania Biomeccanica masticatoria e Protesi.

Jest aktywnym członkiem Accademia Italiana di Conservativa (AIC) od 2005 r. i Włoskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (IAED) od 2011 r.



ODCINEK PRZEDNI MONALDO SARACINELLI



#WHITEOLOGY



+ THE PERFECT PARTNER



ETAPY PRACY



### #WHITEOLOGY

Nauka o pięknych i zdrowych uśmiechach, uwzględniająca anatomię, estetykę, ekspresję, pewność siebie i szczęście.

Stworzony z chęci zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania pacjentów na bielsze uśmiechy; #whiteology pozwala lekarzom przywrócić zdrowy uśmiech w codziennej praktyce, stosując przewidywalne, powtarzalne zabiegi poprawiające uśmiechy pacjentów.

Dla wielu pacjentów bielsze zęby oznaczają początek ich podróży w kierunku idealnego uśmiechu, dlatego też #whiteology to idealne połączenie profesjonalnych żeli do wybielania zębów White Dental Beauty i materiałów kompozytowych White Dental Beauty Professional CompoSite, które razem pozwalają na zastosowanie minimalnie inwazyjnego podejścia do niedrogiego i przewidywalnego wyglądu uśmiechu pacjentów.

Dla tych, którzy są zwolennikami tego wyjątkowego podejścia do wybielania i odbudowy zębów; White Dental Beauty i Style Italiano opracowało etapy pracy, które obejmują zarówno metody, jak i narzędzia wymagane do postępowania według protokołu.

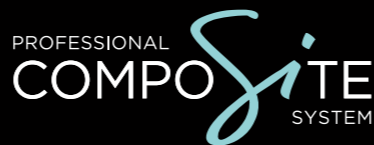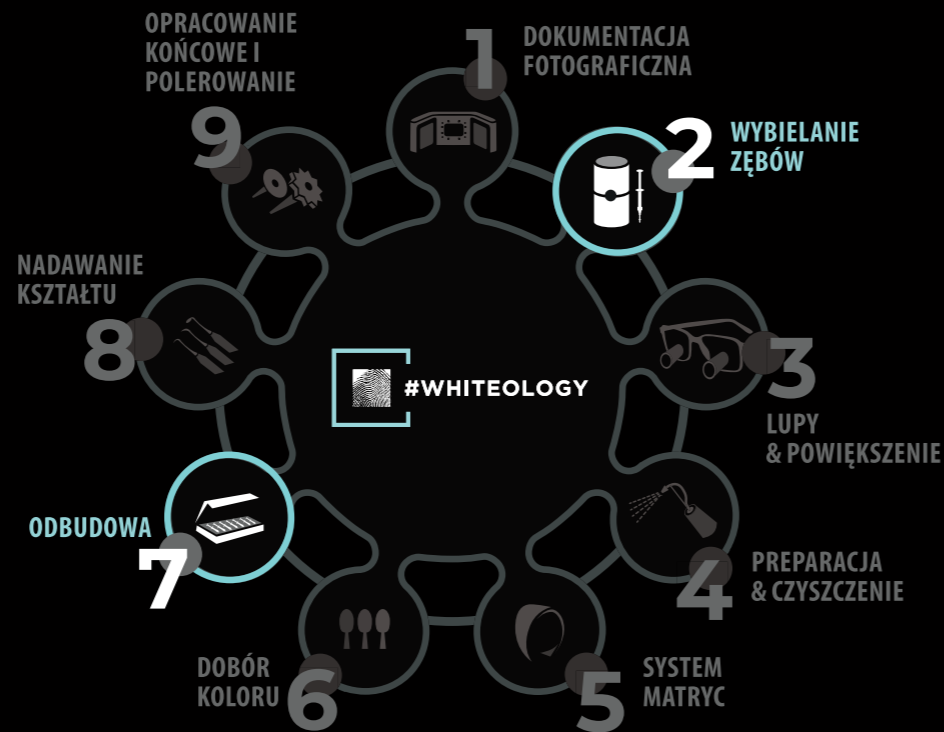

# EDUKACJA... WYBIERZ SWÓJ SPOSÓB



EDUKACJA ONLINE



WARSZTATY PRAKTYCZNE



SZKOLENIA ZAGRANICZNE



### EDUKACJA NA CAŁYM ŚWIECIE:

#### SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Prezentacje z pokazami na żywo

#### WARSZTATY PRAKTYCZNE

Szkolenie jeden do jednego

#### FILMY ONLINE

Wskazówki krok po kroku



[WHITEDENTALBEAUTY.COM](http://WHITEDENTALBEAUTY.COM)

Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w działalność edukacyjną.

Nasze różnorodne kursy łączą edukację z pełnymi dobrej zabawy doświadczeniami społecznymi.

**marrodent**<sup>®</sup>  
A HENRY SCHEIN<sup>®</sup> COMPANY



Wyłączny dystrybutor w Polsce

Marrodent Sp. z o. o. ul. Krasińskiego 31

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: [biuro@marrodent.pl](mailto:biuro@marrodent.pl)

tel. +48 33 810 13 28