

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Axano

Fascynująca innowacja



reddot winner 2022

dentsplysirona.com/axano





Axano

Fascynująca innowacja

Każda innowacja ma swój początek w idei. Potrzeba odwagi, aby móc zakwestionować wszystko co było wcześniej i nieugiętej determinacji, aby nigdy nie spoczywać na laurach.

Wszystkie innowacje i działania, które podejmujemy w Dentsply Sirona są częścią podróży, której celem jest zapewnienie jak najlepszych doświadczeń z każdą generacją naszych unitów stomatologicznych.

W jaki sposób udaje nam się to osiągnąć? Dzięki skupianiu się nie tylko na tym co jest ważne dziś, ale także na tym, co będzie ważne jutro i w kolejnych latach. Łączymy design i funkcjonalność, tworząc inteligentne rozwiązania wyposażone w procedury cyfrowe, które zapewniają Ci jeszcze więcej opcji leczenia i postępowania.

Ponieważ innowacja zachwyca wtedy, kiedy wszystkie elementy składowe tworzą idealnie spójną całość, pozwalając w pełni skupić się na Twoich pacjentach.



Fascynująca innowacja Unit stomatologiczny najwyższej klasy

Nazwa Axano jest synonimem wyjątkowego doświadczenia leczenia. Doskonałe połączenie innowacji, intuicyjności obsługi i korzyści jakie zapewnia nowoczesny unit stomatologiczny, który można dostosowywać do Twoich potrzeb. Systematyczne aktualizacje oprogramowania sprawiają, że unit pozostanie na najwyższym poziomie technologicznym również w przyszłości.

Elegancki design

Axano łączy elegancję designu z wysoką wygodą i innowacyjnymi funkcjami leczenia. Jego eleganckie kształty, podświetlenie i wyświetlacz Smart Touch tworzą atmosferę nowoczesności i szyku.

Doskonała ergonomia

Axano zapewnia Ci doskonałą ergonomię, dzięki której leczenie staje się wygodniejsze i bardziej efektywne a utrzymanie higieny skuteczniejsze, zapewniając liczne korzyści Twojemu gabinetowi i pacjentom.

Doświadczenie cyfrowe

Łatwość obsługi zwiększa satysfakcję pacjenta. Innowacyjny interfejs użytkownika Smart Touch zapewnia Ci doświadczenie cyfrowe, które możesz dostosować do własnych potrzeb.





Smart Touch - intuicyjny interfejs użytkownika

Interaktywny wyświetlacz Smart Touch zapewnia Ci uporządkowany, przejrzysty dostęp do wszystkich funkcjonalności i innowacyjną technologię wielodotykową. Interfejs użytkownika można z łatwością indywidualnie konfigurować tak, aby jak najlepiej odpowiadał Twoim potrzebom.



Smart Delivery Pro - zmotoryzowany ruch konsoli lekarza

Smart Delivery Pro pozwala Ci cały czas mieć konsolę lekarza w zasięgu i dostosowuje się do Twojej wysokości roboczej dzięki funkcji automatycznej regulacji. W ten sposób możesz leczyć pacjentów zgodnie z zasadami ergonomii.



Smart Control - ergonomiczny sterownik nożny

Smart Control to wielofunkcyjny sterownik, który ułatwia Ci obsługę unitu, zapewniając natychmiastowy dostęp do najważniejszych funkcjonalności bez używania rąk. To intuicyjne rozwiązanie nie odwraca Twojej uwagi od pacjenta i uwalnia ręce, pozwalając Ci prowadzić leczenie w sposób ergonomiczny.



Elegancki design

Efektywność i inspiracja.
Dzięki Axano leczenie pacjentów
to przyjemność.




Design i wydajność pracy. Funkcjonalność i elegancja.

Design konsoli lekarza i asysty unitu Axano charakteryzuje innowacyjność, elegancja i minimalizm, na których opiera się jego wyjątkowa jakość i efektywność pracy. Dzięki nowemu, dużemu wyświetlaczowi graficznemu Smart Touch z nowoczesną, łatwą do czyszczenia powierzchnią ze szkła, leczenie odbywa się w sposób intuicyjny. Wbudowane podświetlenie wprowadza w Twoim gabinecie subtelne akcenty kolorystyczne, które możesz indywidualnie dostosowywać tak, aby harmonijnie współgrały z istniejącym oświetleniem.

Smart Touch

Duży wyświetlacz 10.3" Smart Touch gwarantuje użytkownikowi bardzo wygodną i intuicyjną obsługę. Dzięki szerokiemu zakresowi opcji indywidualizacji Axano wyznacza całkowicie nowy standard wzornictwa. Wysokiej jakości powierzchnia ze szkła doskonale komponuje się z ogólną stylistyką Axano i powoduje, że zabiegi czyszczenia i konserwacji przeprowadza się łatwo i sprawnie.



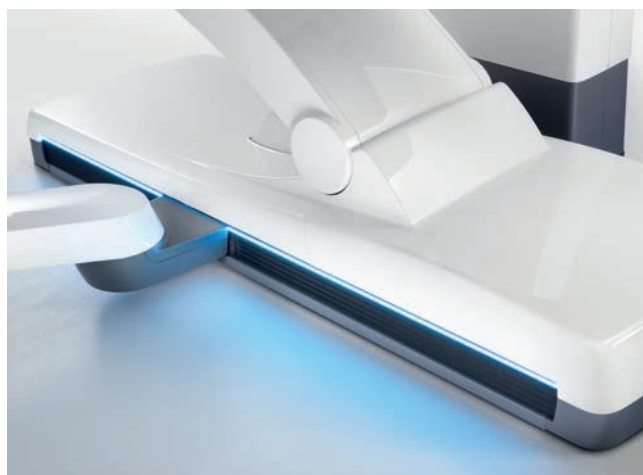

Podświetlenie

Subtelnie rozproszone światła konsoli lekarza i asysty oraz prowadnicy Smart Delivery Pro mają przyjemny, kojący wpływ na otoczenie. Opcje indywidualizacji koloru pozwolą Ci stworzyć niepowtarzalną atmosferę idealnie dostosowaną do estetyki wystroju Twojego gabinetu. Zielone światło na przykład informuje o prowadzeniu procesu dezynfekcji urządzenia. Możesz też samodzielnie wybrać kolor podświetlenia, aby współgrał z kolorem tapicerki.



Ekskluzywna paleta kolorów, która podkreśli Twój gust w zakresie wzornictwa.

Axano zajmuje centralne miejsce w Twoim gabinecie, dlatego jego design odgrywa kluczową rolę w tworzeniu odpowiedniego środowiska dla Ciebie i Twoich pacjentów. Zdajemy sobie sprawę jak ważna jest to rola, dlatego na etapie projektowania skupiliśmy nasze starania na tym, aby każdy wyprodukowany unit imponował doskonałą jakością wykonania oraz zapewniał wyjątkową odporność i trwałość na długie lata codziennego użytkowania.

Ponadto możesz wybierać spośród wielu kolorów tapicerki. Możesz również zdecydować się na innowacyjną miękką tapicerkę Lounge, aby zapewnić swoim pacjentom najwyższy poziom komfortu. W tej wersji masz dodatkowe możliwości konfigurowania unitu dzięki opcjom wyboru kolorystyki szwów.

Kolory tapicerki

Kolekcja Elegance



Carbon*

Merlot*

Platinum

Pacific*

Prune*

Kolekcja Natural



Umbra*

Sapphire

Basalt*

Cherry

Sierra*

Kolekcja Vital



Aloe

Aqua

Flamingo

Orchid*

*Kolory dostępne również dla tapicerki Lounge.

Kolory szwów**



Standardowy

Red

Dark gray

Light blue

Rose

**Kolory dostępne tylko dla tapicerki Lounge.



reddot winner 2022

Axano received the Red Dot Award for the best product design.





Doskonała organizacja pracy

Niezawodność i wydajność. Oszczędzasz czas,
który możesz przeznaczyć na to,
co dla Ciebie najważniejsze.



Efektywność i elastyczność. Zyskujesz czas dla swoich pacjentów.

Wszystkie procesy zostały tak skoordynowane, aby zoptymalizować czas pacjenta na fotelu. Dokładnie tak jak tego potrzebujesz. Czy prowadzisz leczenie samodzielnie, czy we współpracy z zespołem, Axano można dostosować do Twoich wymagań w danej chwili, aby zapewniał Ci jednocześnie doskonałe leczenie i wygodną obsługę, z korzyścią dla Ciebie i Twoich pacjentów.

Optymalne rozłożenie instrumentów dzięki koncepcji oddzielnych paneli

Konsolę lekarza i panel asysty, a także tacę można przemieszczać szybko i niezależnie od siebie, co pozwala Ci sprawnie przechodzić od prowadzenia leczenia z innymi członkami zespołu do pracy indywidualnej. Dla maksymalnego komfortu pracy zapewnia Ci także przestrzeń na dodatkową tacę.





Ilość rękawów 6+2

Końcówki rozmieszczone są w przejrzysty i ergonomiczny sposób dzięki 6 rękawom prowadzonym od dołu, które można swobodnie konfigurować, aby sprostać Twoim wymaganiom. W dodatkowym uchwycie można także zamontować kamerę wewnętrzną. Istnieje również możliwość podłączenia dodatkowego mikrosilnika do zabiegów implantologicznych.



Panel asysty

Elegancka, przejrzysta stylistyka panelu asysty ułatwia asystentowi wypełnianie codziennych obowiązków dzięki opcjom zwiększonej kontroli.



LEDview Plus

LEDview Plus cechuje ogromna wszechstronność w każdej dziedzinie stomatologii. Możliwość zmiany temperatury barwowej, natężenia światła w zakresie 8-40 tys. lux oraz cztery niezależne, bezcieniowe diody LED ułatwiają dobór właściwego światła i zapewniają doskonałą widoczność podczas leczenia. Wbudowany tryb pracy z kompozytem umożliwia spokojną pracę bez obaw o przedwczesne utwardzenie materiałów do wypełniania. Lampę można pozycjonować indywidualnie i obsługiwać za pomocą czujnika bezdotykowego.



Zmotoryzowany blok spluwaczki

Spluwaczka jest wyposażona w silnik, co umożliwia automatyczne przysysanie i odsysanie jej od pacjenta. Istnieje dodatkowa możliwość zaprogramowania pozycji płukania, co przyspiesza przebieg leczenia i zwiększa jego bezpieczeństwo.

Prawidłowa pozycja ciała i ergonomia pracy. Twój dzień staje się łatwiejszy.

Znacznie więcej niż zdrowa postawa - doskonała ergonomia ma strategicznie ważne znaczenie w Twojej codziennej pracy. Pracę można zautomatyzować i oszczędzać czas tylko wtedy, gdy każdy ruch jest precyzyjny.

Prowadzenie leczenia na stojąco

Funkcja regulacji wysokości konsoli lekarza automatycznie ustawia Smart Delivery Pro odpowiednio do Twojego położenia roboczego, jeśli jednak zdecydujesz się pracować na stojąco - unit zapewnia odpowiednią do tego ergonomiczną opcję pracy.

Zmotoryzowany zagłówek

Aby usprawnić ułożenie pacjenta, można zachować i przywrócić indywidualne ustawienia nachylenia i zasięgu zagłówka wraz z pozycją fotela*.

*Tylko z Sidexis 4





Pozycja fotela podążająca za położeniem głowy pacjenta

Niezależnie od wzrostu pacjenta, system podążania fotela za zautomatyzowanym zagłówkiem sprawia, że głowa pacjenta znajduje się zawsze w tej samej, ustawionej przez Ciebie pozycji roboczej. Axano pozostawia Ci jednak wybór pozwalając również dopasować pozycję pacjenta całkowicie indywidualnie.



Ergonomiczne pozycjonowanie pacjenta

Funkcja ErgoMotion synchronizuje ruchy oparcia i fotela, zapewniając plecom doskonale ergonomiczne ułożenie. Twoi pacjenci mogą zrelaksować się podczas leczenia dzięki opcji masażu i podparcia okolicy lędźwiowej. Praca silników fotela jest bardzo cicha i można regulować jej prędkość.

Bezpieczne opracowanie kanałów. Wysokie standardy leczenia.


Funkcje leczenia Endo, Implant usprawniają Twoją pracę i zwiększają bezpieczeństwo kliniczne. Dzięki nim przejście od postawienia diagnozy do wyjaśnienia planu leczenia i rozpoczęcia leczenia przebiega sprawnie i szybko. Podczas leczenia endodontycznego i implantologicznego ekran użytkownika Smart Touch przejrzyste i w zrozumiały sposób wyświetla poszczególne kroki. A obsługa Smart Control i Smart Touch jest intuicyjna i nie absorbuje rąk.

Mikrosilnik implantologiczny

Możesz wybrać z domyślnej biblioteki każdy system implantologiczny, którego chcesz użyć. Znajdziesz też takie strategicznie ważne parametry jak prędkość, moment obrotowy, co zapewnia bezpieczeństwo i efektywność postępowania implantologicznego. Dzięki zintegrowanej funkcji implantologicznej nie potrzebujesz dodatkowych urządzeń zewnętrznych, a leczenie przebiega wydajnie, z zachowaniem sterylności.

Mikrosilnik endodontyczny

ApexLocator i biblioteka pilników ułatwiają leczenie endodontyczne, zapewniając jednocześnie wysokie bezpieczeństwo kliniczne. Nowoczesny sposób wyświetlania głębokości kanału i doboru pilnika jeszcze bardziej ułatwiają każdy rodzaj zabiegu. Wybór przebiegu kanału pozwala optymalnie dostosować moment obrotowy i szybkość pracy pilnikiem i ograniczyć ryzyko złamania narzędzia. Bieżące parametry pracy widoczne są na ekranie komputera zainstalowanego na unicie.*

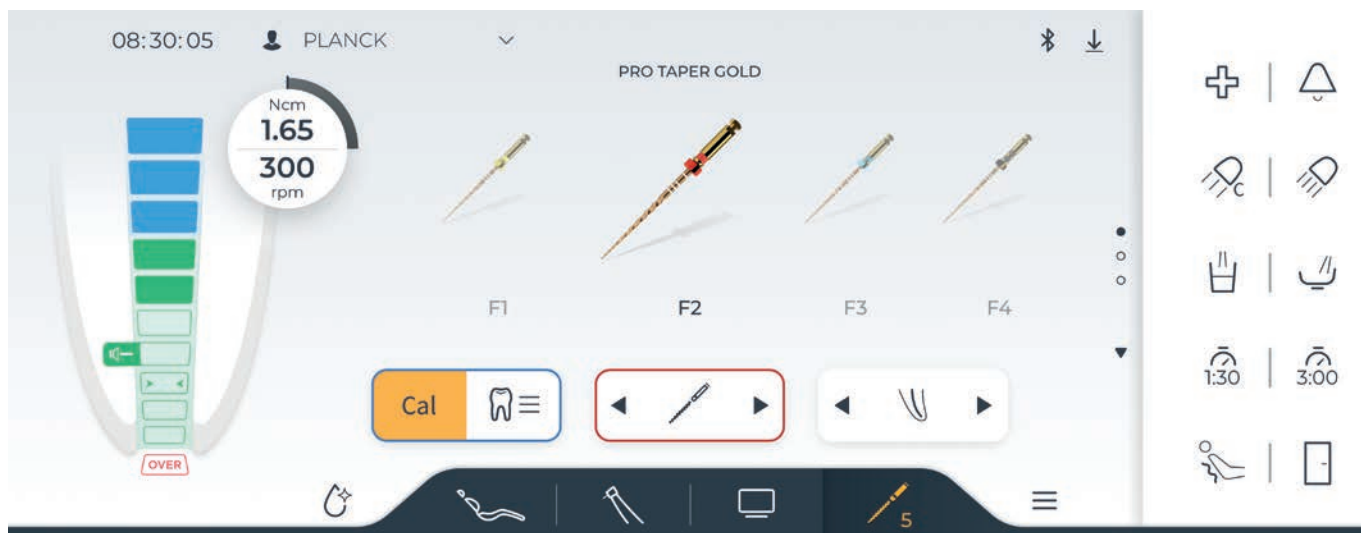

*Tylko w połączeniu z Sidexis 4



Komunikacja bez obaw. Lepsze relacje z pacjentami.

Doskonała komunikacja jest niezbędna, aby zdobyć zaufanie i zbudować relacje z pacjentami. Właśnie dlatego Axano wyposażono w liczne narzędzia, które pozwalają pacjentom zrozumieć i zaakceptować Twój plan leczenia. Dzięki zintegrowanym z unitem kamerze SiroCam AF+ i monitorowi 22" Sivation możesz omawiać z pacjentami w gabinecie obrazy wewnętrzne, zdjęcia RTG, lub wyciski cyfrowe. Możesz przedstawić im krok po kroku zaplanowane przez Ciebie leczenie, rozwiązać ich wątpliwości i obawy oraz przekonać do swojej propozycji leczenia.





Monitor Sivision

Możesz zwiększyć transparentność prowadzonego leczenia dzięki 22" monitorowi Sivision, wyświetlając na nim różne materiały związane z postawioną przez Ciebie diagnozą. Pacjenci poczują, że uczestniczą w procesie, a prezentacja wizualna ułatwi im zrozumienie i właściwą ocenę sytuacji klinicznej.



SiroCam AF+

Zoptymalizuj wizualizację i proces dokumentacji leczenia. SiroCam AF+ zapewnia wysoką jakość obrazu i łatwą obsługę dzięki opcji autofocus. W połączeniu z 22" monitorem Sivision możesz przeglądać obrazy w czasie rzeczywistym, efektywnie uzyskując przejrzystą wizualizację sytuacji klinicznej.



Przetwarzanie obrazu

Możesz wybrać i edytować obrazy wewnętrzne bezpośrednio przez interfejs użytkownika Smart Touch. Możesz również nanosić na nie kolorowe oznaczenia i adnotacje, co umożliwia Ci szybkie i precyzyjne dokumentowanie Twoich wniosków klinicznych. W trakcie konsultacji z pacjentem możesz się posiłkować wyświetlaniem różnych materiałów z biblioteki multimedialnych bezpośrednio na konsoli lekarza.



Uchwyt Smart Device

Więcej opcji: możesz wykorzystać uchwyt do podtrzymywania gabinetowego tabletu podczas leczenia. Po prostu zamocuj go na uchwycie magnetycznym na panelu lekarza, aby stał się aktywnym elementem Twojej komunikacji z pacjentem, na przykład wtedy gdy używasz aplikacji Sidexis IX do przedstawienia postawionej przez Ciebie diagnozy.

Leczenie ze szczególną dbałością o higienę, oszczędzając cenny czas.

Dzięki Axano wysokie standardy higieny osiągnane przy minimalnym wysiłku to norma. Wszystko zostało zaprojektowane z myślą o efektywnym prowadzeniu zabiegów, począwszy od gładkich, łatwych do czyszczenia powierzchni po odłączane elementy i wbudowane adaptory do dezynfekcji unitu.

Nawigowane postępowanie sanitarne

Blok sanitarny w Smart Touch ukazuje procedury sanitarne, które należy wkrótce przeprowadzić. Możesz również z tego miejsca podjąć automatyczne środki sanizacji - regularne płukanie i comiesięczną dezynfekcję. Za jednym dotknięciem przycisku rękawy, węże ssące i spluwaczka zostaną automatycznie spłukane środkiem czyszczącym.

Podświetlenie jest istotną częścią postępowania sanitarnego, informując na odległość pracowników gabinetu o prowadzeniu sanizacji, co pozwala oszczędzić czas i energię.





Adapter do czyszczenia rękawów

Wbudowane, odłączane adaptory do czyszczenia zapewniają łatwe i niezawodne czyszczenie i dezynfekcję rękawów za pomocą wbudowanego urządzenia do dezynfekcji. Aby regularnie płukać instalację wodną, po prostu podłącz rękawy do kolorowych adapterów w bloku wodnym.



Łatwe czyszczenie dzięki odłączanym złączkom węży ssących

Węże ssawne można czyścić automatycznie, płucząc za pomocą pojedynczego przycisku pomiędzy pacjentami lub w trakcie dłuższego zabiegu. Środek czyszczący jest dodawany automatycznie. Do procedury czyszczenia można włączyć także spluwaczkę.



Części odłączane

Wszystkie części istotne z punktu widzenia sanizacji unitu można odłączyć w celu poddania sterylizacji i/lub dezynfekcji termicznej i zapobieżeniu zakażeniu krzyżowemu. Również spluwaczkę można odłączyć, aby można było szybko i łatwo ją wyczyścić.



Powierzchnie łatwe do pielęgnacji

Axano zaprojektowano tak, aby zabiegi sanitarne można było prowadzić efektywnie i skutecznie. Wszystkie powierzchnie są gładkie i łatwo jest je czyścić i dezynfekować.



Dentsply
Sirona

Doświadczenie cyfrowe

Intuicyjne postępowanie,
w którym indywidualizacja
jest na wyciągnięcie ręki.





Digitalizacja i design. Kontrola na każdym etapie leczenia.



Przejrzysta wizualizacja

Ważne informacje wyświetlane są w czytelny sposób z wykorzystaniem łatwych do rozpoznania ikon i obrazów.

Indywidualizacja

Funkcja Drag&Drop pozwala Ci szybko i łatwo przeorganizować przyciski interfejsu użytkownika i umieścić je tam, gdzie ich potrzebujesz, aby mieć łatwy dostęp.

Dzięki Smart Touch masz szybki i łatwy dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji, a ich obsługa jest intuicyjna. Dodatkowo możesz samodzielnie określić pozycję przycisków i funkcjonalności w interfejsie użytkownika dzięki funkcji Drag&Drop, co pozwala dostosować wyświetlacz do Twoich preferencji i potrzeb bez odwracania oczu od pacjenta.



Kontrola nad materiałami multimedialnymi

Za pomocą wyświetlacza Smart Touch możesz uzyskać dostęp, edytować i kontrolować materiały multimedialne bez konieczności przechodzenia na inny komputer.

Łatwy w użyciu

Nowy design i opcje indywidualizacji zapewniają intuicyjną obsługę.

Dynamiczne leczenie cyfrowe. Praca w doskonale zintegrowanym środowisku.

Axano z łatwością adaptuje się do procesów i procedur w Twoim gabinecie oraz zapewnia Tobie i Twoim pacjentom fascynujące doświadczenie leczenia w środowisku cyfrowym.

Kontrola aplikacji PC za pośrednictwem Smart Touch

Interfejs użytkownika Smart Touch zapewnia Ci kontrolę nad leczeniem i korzyści związane z pracą w gabinecie funkcjonującym w sieci bez odchodzenia od fotela pacjenta.

Oprogramowanie Sivision View doskonale współpracuje z Sidexis 4

Sivision View zapewnia Ci wsparcie podczas konsultacji i kiedy tłumaczysz przebieg leczenia pacjentom. Pozwala Ci wyświetlać zawartość plików z badaniem RTG, prezentacjami lub zasobami wideo z Twojej bazy danych. Ponadto możesz zachować informacje o ustawieniu fotela dla każdego pacjenta, a Endo Plugin pozwala na wyświetlanie na monitorze danych z endometru ApexLocator*.

* Wymaga Sidexis 4



Komunikacja i wsparcie. Dostępność odpowiedniego dla Ciebie serwisu.

Serwis Axano jest taki jak sam Axano – sprawny i cyfrowy. Jeśli zarejestrujesz unit Axano i potrzebujesz wsparcia serwisowego, uzyskasz je szybko i łatwo. Zwiększ wydajność pracy Twojego unitu, unikając awarii. Dzięki oprogramowaniu serwisowemu Axano z łatwością zaplanujesz działania serwisowe i ograniczysz do minimum przestoje w pracy.



Twój Axano. Pakiety wyposażenia i konfiguracja indywidualna.



Practice

- 2x silnik elektryczny BL ISO F (albo BL E)
- Rękaw do turbiny
- Rękojeść skalera SiroSonic TL
- Lampa zabiegowa LEDview Plus
- Do 2 stołków lekarza w promocyjnej cenie



Endo

- Funkcje endodontyczne włącznie z systemami pilników do pracy ruchem recyprokalnym
- ApexLocator wyświetlany na monitorze Sivation
- Kątnica endodontyczna z podświetleniem T1 Line Endo 6 L



Implant

- Funkcje implantologiczne
- Wbudowana pompa do roztworu soli fizjologicznej
- Silnik elektryczny BL Implant E
- Kątnica Implant 20:1



Sivation

- Źródło zasilania kamery w stoliku lekarza
- Kamera SiroCam AF+
- Monitor 22" Sivation



Zestaw ApexLocator



Wbudowana pompa na roztwór soli fizjologicznej



Silnik elektryczny BL Implant E (z oświetleniem)



Zestaw zaworów na urządzenia zewnętrzne



Podstawa na lampę do polimeryzacji SmartLite Pro



SKamera iroCam AF+ w dodatkowym uchwycie



Monitor 22" Sivation na niezależnym ramieniu



Uchwyt Smart Device na tablet



Stołeczki lekarza Hugo, Theo, Carl



Aparat RTG Heliodont Plus do montażu na unicie



Wyświetlacz panoramiczny zdjęć rtg



Podłokietniki

Opcje indywidualne dla Ciebie

Oto pełna lista sprzętu, unitów podstawowych wraz z wyposażeniem dodatkowym.

Fotel pacjenta	
Ustawienia fotela dla konkretnego pacjenta*	■
Zmotoryzowany zagłówek z ustawieniami indywidualnymi dla konkretnego pacjenta*	■
Podświetlenie	□
Tapicerka Premium Thermo	□
Tapicerka Lounge, na zamówienie z kolorowymi szwami	□
Funkcja podparcia odcinka lędźwiowego	■
Funkcja masażu odcinka lędźwiowego	□
Obrotowy podłokietnik, prawy	□
Podłokietnik, lewy	□
Czterokierunkowy sterownik nożny	■
Smart Control	■
Zestaw zaworów na urządzenia zewnętrzne	□
Dodatkowa poduszka dla małych pacjentów	□
ErgoMotion	■
Regulacja prędkości przesuwu	■

Konsola lekarza (Smart Touch, 6 pozycji, zdejmowane mocowania i uchwyty na narzędzia)	
Dmuchawko-strzykawka Sprayvit z oświetleniem	□
Pierwszy napęd (na silnik lub turbinę)	■
Drugi napęd (na silnik lub turbinę)	■
Trzeci napęd (na silnik lub turbinę)	■
Czwarty napęd (na silnik lub turbinę)	□
Silnik elektryczny BL E	□
Silnik elektryczny BL ISO F	□
Rękaw do turbiny	■
Rękojeść do skalera SiroSonic TL	□
Funkcje implantologiczne	□
Wbudowana pompa roztworu soli fizjologicznej	□
Elektryczny silnik BL Implant E	□
Kątnica Implant 20:1	□
Funkcje endodontyczne z systemami pilników recypok.	□
ApexLocator z wyświetlaniem na monitorze Sivision	□
Kątnica z oświetleniem T1 Line Endo 6 L	□
Port USB	■
Obsługa bez wykorzystania rąk z kursorem	■
Uchwyt Smart Device na tablet	□
Panoramyczny wyświetlacz zdjęć RTG	□

Stolik asysty (z wyświetlaczem dotykowym, 4 pozycje, zdejmowany uchwyt)	
Dmuchawko-strzykawka Sprayvit z oświetleniem	□
Urządzenie ssące	■
Ślinociąg	■
Ssak chirurgiczny	□
Drugi zestaw - wysokowydajny ssak	□
Podstawa na lampę do polimeryzacji SmartLite Pro	□
Zasilacz 12V klasy medycznej	□

Blok wodny	
Urządzenie do dezynfekcji ze stałą dezynfekcją i funkcją sanityzacji	■
Czyszczenie chemiczne węża ssawnego i spluwaczki	■
Zawór spluwaczki na system wet suction	■
Separator automatyczny	□
Separator amalgamatu	□
Zdejmowana zmotoryzowana obrotowa spluwaczka ze szkła	■
System sanitarny ze zdejmowanym modułem czyszczenia i funkcją autopurge	■
Funkcja Aqua (niezależne źródło wody)	■

Komunikacja z pacjentem	
Kamera SiroCam AF+	□
Monitor 22" Sivision, na podstawce wraz z podstawką	□
Monitor 22" Sivision, na niezależnym ramieniu	□
Zasilacz kamery na konsoli lekarza	□
Zestaw przewodów do podłączenia komputera PC	□

Stołki lekarskie (Opcjonalnie długa lub krótka sprężyna gazowa)	
Hugo Freehand (z obsługą nożną)	□
Hugo Manual (z obsługą ręczną)	□
Hugo Manual Plus (z obsługą ręczną i obręczą na stopy)	□
Carl Manual (z obsługą ręczną)	□
Carl Manual Plus (z obsługą ręczną i obręczą na stopy)	□
Theo, siodłowy	□

Opcje dodatkowe	
Tacka na instrumenty	□
LEDview Plus wersja montowana na unicie	■
LEDview Plus model montowany na suficie	■
Adapter na Heliodent Plus / LEDview Plus wersja sufitowa	□
Adapter na Heliodent Plus wersja montowa na unicie	□
Lustro dla pacjenta	□
Uchwyt na kamerę na lampie	□

■ Znajduje się w unicie/zestawie podstawowym
□ Opcjonalne

* Dostępne w połączeniu z Sidexis 4

Dentsply Sirona Poland Sp. z o.o.

Poleczki Business Park,
ul. Salsy 2, budynek Lisbon
02-823 Warszawa
dentsplysirona.com

Rozwiązania kliniczne

Stomatologia zachowawcza
Ortodoncja
Endodoncja
Implanty
Protetyka

Technologie

CAD/CAM
Obrazowanie
Unity stomatologiczne
Instrumenty