



ULTICLEAN 500L



Skaler dentystyczny + Piaskarka

MOC



WYDAJNOŚĆ



PRECYZJA





ULTICLEAN 500L

Nowoczesne podejście do profilaktyki
przy minimalnie inwazyjnych zabiegach
piaskowania i skalingu.



+ PIASKOWANIE

+ LECZENIE PRZYŻĘBIA


+ LECZENIE ENDODONTYCZNE

+ KONSERWACJA IMPLANTÓW

+ SKUTECZNE I WYGODNE USUWANIE
PŁYTKI NAZĘBNEJ

Precyzyjna technologia

Dostarczanie preferowanego protokołu
zdrowia jamy ustnej

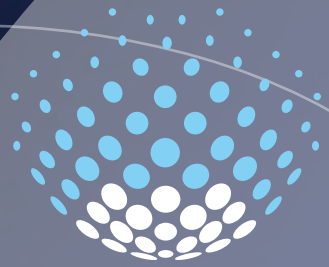


ULTICLEAN
500L

Automatyczna

identyfikacja trybu procedury

Automatycznie rozpoznaje wymaganą funkcję po podniesieniu jednej z rękojści.

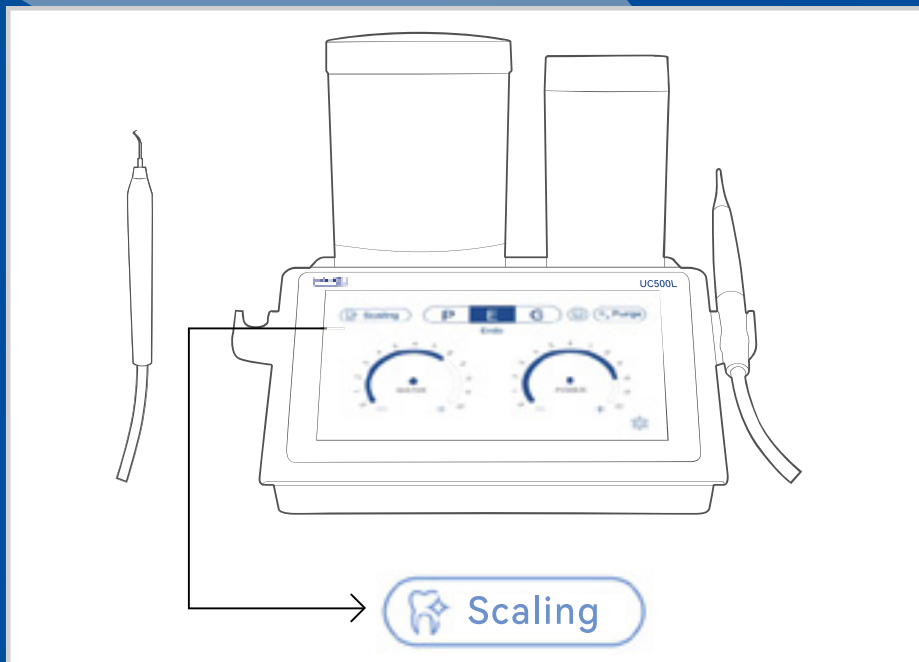

Przykład skalingu.




Przed



Po



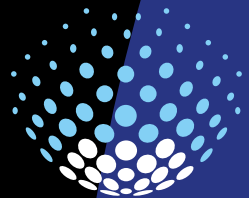

ULTICLEAN 500L



Eliptyczna wibracja

Eliptyczna trajektoria drgań umożliwia pracę pod kątem 0° między końcówką a powierzchnią zęba, zapewniając efekt polerowania. Powoduje to rozproszenie siły uderzenia między końcówką a zębami w celu uzyskania bardziej komfortowego efektu skalingu.

Osiągnij

360°

precyzyjny
skaling

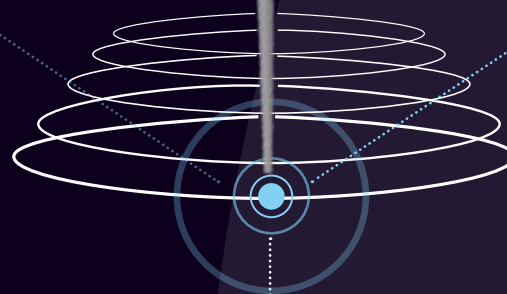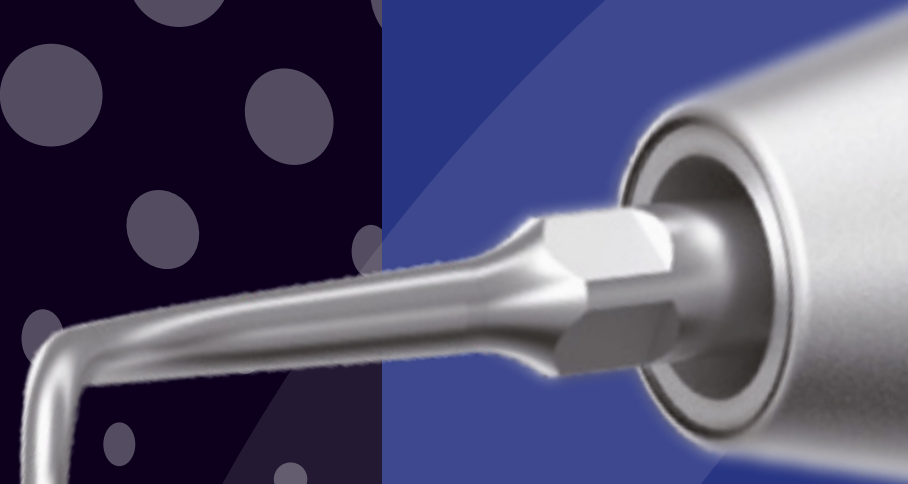

Końcówka ze stopu Tytanu



Ultradźwiękowe leczenie przyzębia

| WIDOK | KOD PRODUKTU | ROZM. | TYP PROCEDURY | OPIS |
|-------|--------------|-----------------|---------------|---|
| | BA150180 | BAC33E | Okolozębowa | Do usuwania kamienia nazębnego znajdującego się głęboko w kieszonce przyzębnej. |
| | BA150181 | BAC50RE | Okolozębowa | Do skalingu poddziąsłowego. |
| | BA150182 | BAC50LE Tips | Okolozębowa | Do skalingu poddziąsłowego. |
| | BA150184 | BAC59E | Okolozębowa | Do skalingu poddziąsłowego. |
| | BA150183 | BAC52E | Skaling | Do skalingu naddziąsłowego Usuwanie kamienia nazębnego i płytki nazębnej. |
| | BA150185 | BAC56E Tip | Skaling | Do skalingu naddziąsłowego Usuwanie silnego kamienia. |
| | BA150195 | BAC60E Tips | Endodoncja | Do irygacji kanałów korzeniowych. |
| | BA150196 | BAC62E Tips | Endodoncja | Do irygacji kanałów korzeniowych. |
| | BA150188 | BAC90E Tips | Implant | Do czyszczenia implantów. |
| | BA150186 | BAC94E Tips | Implant | Do czyszczenia implantów. |
| | BA150187 | BAC95E Tips | Implant | Do czyszczenia implantów. |

Skaling ultradźwiękowy naddziąsłowy i poddziąsłowy z eliptycznym torem drgań rozprasza siłę uderzenia między końcówką a zębami.

Twardość końcówki ze stopu tytanu jest niższa niż cementu i szkliva, więc ząb nie ulega uszkodzeniu.

Air - polishing

Piaskowanie to proces polegający na użyciu sprężonego powietrza do precyzyjnego dostarczania proszku i wody na powierzchnię zęba w celu usunięcia substancji przylegających do powierzchni zęba (takich jak płytki nazębne, pigment, biofilm itp.).

Gama proszków Ulticlean obejmuje proszek perio, który umożliwia czyszczenie poddziąsłowe, co pomaga chronić powierzchnię tkanek miękkich.

Skuteczne i komfortowe leczenie sprawia, że jest to przyjemniejsze doświadczenie dla pacjentów.

Piaskowanie jest mniej szkodliwe dla szkliwa zębów przy minimalnym ścieraniu w porównaniu z konwencjonalnymi technikami skalingu i polerowania.

Dokładne usuwanie płytki nazębnej


Piaskowanie może osiągnąć znaczący efekt na powierzchni okluzyjnej, powierzchni przylegającej, zamkach ortodontycznych i innych trudnych do czyszczenia obszarach.

Zmniejszenie przyczepności płytki nazębnej i odbarwień

Po skalingu ultradźwiękowym lub ręcznym pacjenci mogą odczuwać, że powierzchnia zębów jest szorstka i nierówna.

Główną funkcją polerowania powietrzem jest polerowanie i czyszczenie powierzchni zębów.

Po polerowaniu powierzchnia zębów jest gładsza i czystsza, dzięki czemu płytka nazębna i pigment mają mniejsze szanse na przyleganie do zębów.

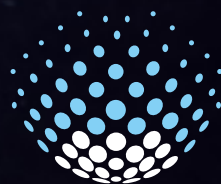

ULTICLEAN
500L



Kontrola

Piaskowanie **Poddziąsłowe**

Skutecznie kontroluje stany zapalne naturalnych zębów / tkanek miękkich / zakażeń okołowszczepowych.

W porównaniu z tradycyjnym skalingiem Piaskowanie może lepiej oczyścić powierzchnię zęba, a także powierzchnię implantów.



ULTICLEAN
500L





Kontrola płytki nazębnej

Dysza małego kalibru
zapewnia bardziej precyzyjne
piaskowanie i skuteczniejsze
usuwanie płytki nazębnej.



ZEWNĘTRZNE: WODA

Mycie, zbieranie i regulacja.

ZEWNĘTRZNE: WODA

Zapewnia ochronę i ciepłą wodę.

WEWNĘTRZNE:

Sprężone powietrze i piasek.

Usuwa pigmenty, płytkę nazębną,
biofilm i wczesny kamień nazębny.



Zalecany kąt
30° - 60°



Zalecana odległość
robocza 3 - 5 mm

Specjalnie zaprojektowany kompletny system wózków do urządzenia Ulticlean UC500L zapewnia większą higienę i wydajność.

Kompaktowa i unikalna konstrukcja

Elegancki i wydajny system zarządzania kablami pozwala na stworzenie niezwykle higienicznego i funkcjonalnego stanowiska pracy.

Płynny ruch - 360

Dzięki wysokiej jakości systemowi kół, nasz wózek został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą zwrotność w przestrzeni roboczej.

Ergonomiczny



Efektywne zarządzanie przestrzenią dzięki przednim otworom do przechowywania zapewnia łatwy dostęp do piasków.

Od przodu:

826,5 cm wysokości x 330 cm szerokości na dole x 220 cm szerokości na górze

Z boku:

826,5 cm wysokości x 361 cm szerokości na dole x 286 cm szerokości na górze

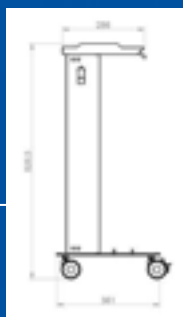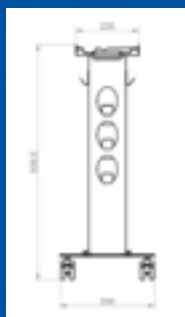

Wymiary

WÓZEK - BA150300





ULTRACLEAN
500L

Simple + sophisticated



Wielofunkcyjny sterownik nożny



Tryb bez wody



Tryb zwiększonej mocy





Tryb płukania



Standardowy tryb pracy

Podwójne zasilanie wodą

Wyposażone w dwa pojemniki na wodę (600 ml, 1400 ml) wykonane z materiałów antykorozyjnych, mogą zawierać specjalne płyny, takie jak chlorheksydyna, nadtlenek wodoru i podchloryn sodu. Dostępne jest również zewnętrzne źródło wody. Urządzenie do podgrzewania wody sprawia, że zabieg jest komfortowy dla pacjenta.

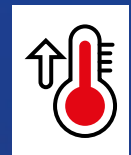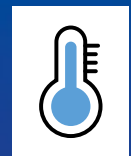



Orn

OD WYDAJNOŚCI PO KOMFORT



pakiet



ULTRACLEAN 500L

**Wszystko, czego potrzebujesz
jednym pakiecie:**

B.A. International jest jedną z największych firm zajmujących się tego typu działalnością w Europie.

Zintegrowaliśmy najnowsze technologie polerowania ultradźwiękowego i powietrznego w jednym urządzeniu, dzięki czemu możemy skutecznie eliminować biofilm, zmniejszając w ten sposób konieczność ręcznego i mechanicznego przyrządowania.

- Urządzenie UC500L
- 4 rękojeści
- 14 końcówek w zestawie
- 2 pudełka do piasku
- Profesjonalna usługa montażu
- 2 lata gwarancji
- Zestaw obejmuje również:
klucz dynamometryczny, pojemniki do sterylizacji, igła czyszcząca, złącza kompresora i części zamienne.



BA Ulticlean Profilaktyka

seria Piasków

PIASEK STOMATOLOGICZNY HENRY SCHEIN 250g
(Do stosowania naddziąsłowego).

**PIASEK STOMATOLOGICZNY HENRY SCHEIN
ACCLEAN AIR POLISHING POWDER PERIO PLUS**
(Do stosowania pod- i naddziąsłowego).



| | | STANDARD | STANDARD | PERIO PLUS |
|--------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| KOD PRODUKTU | | 5723827 | 5723828 | 9883899 |
| SMAK | | CYTRYNA | MIĘTA | NEUTRALNY |
| BAZA SUROWCOWA | | WODOROWĘGLAN SODU | WODOROWĘGLAN SODU | TAGATOZA |
| ROZMIAR CZĄSTEK Ø | | 40 µM | 40 µM | 15 µM |
| pH | | W 20 °C: 8,1-8,4 | W 20 °C: 8,1-8,4 | (10 G/L) W 20°C: 6-8 |
| ZĄB | PRZEBARWIENIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| | SZKLIWO | ✓ | ✓ | ✓ |
| | BIAŁE PLAMY NA SZKLIWIE | ✓ | ✓ | ✓ |
| | ZĘBINA | ✓ | ✓ | ✓ |
| DZIAŚŁO | DZIAŚŁO | ✓ | ✓ | ✓ |
| | JĘZYK I PODNIEBIENIE | ✓ | ✓ | ✓ |
| ODNOWA | KOMPOZYT HYBRYDOWY | ✓ | ✓ | ✓ |
| | MATERIAŁY JONOMEROWE | ✓ | ✓ | ✓ |
| IMPLANT | IMPLANT I ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ORTODONCJA | ZAMKI I URZĄDZENIA | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | ✓ | ✓ | ✓ |

Końcówka
do piaskowania

Łatwiejsze czyszczenie



Aksesoria

Jednostka główna + sterylizatory

Steryliizator do zestawu piaskowania

do sterylizacji i przechowywania końcówki do piaskownia i igły czyszczącej.

Steryliizator ultradźwiękowy

Do sterylizacji i przechowywania końcówki ultradźwiękowej i igły czyszczącej.

Pudełko zewnętrzne

Do przechowywania wszystkich akcesoriów UC500L.

| MATERIAŁ | GLICYNA | ZĘBINA | ERYTRYTOL | WODOROWĘGLAN SODU | SZKLIWO |
|----------|---------|---------|-----------|-------------------|---------|
| MOHS* | 2 | 2 - 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.5 |

Konfiguracja standardowa

| | | | | | |
|---|----|--------------------------------|----|--------------------------------|----|
| RĘKOJEŚĆ ULTRADŹWIĘKOWA BAC5L | x2 | POJEMNIK DO STERYLIZACJI | x2 | ZBIORNIK PIASKU | x2 |
| KOŃCÓWKA DO PIASKOWANIA (BAC5P x 1) (BAC5B x 1) | x2 | POJEMNIK DO WODY | x2 | RURKA WODNA / RURKA POWIETRZNA | x2 |
| KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY | x2 | WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY | x1 | | |

Wybór końcówek ultradźwiękowych obejmuje:

| | |
|--|----|
| BAC33E / BAC50RE / BAC50LE / BAC59E / BAC56E / BAC60E / BAC62E | x2 |
| BAC94E / BAC95E | x1 |

| KOD PRODUKTU | |
|--------------|--|
| BA150100 | Skalero - Piaskarka UC500L |
| BA150150 | Końcówka do piaskowania BAC5P do leczenia naddziąstowego |
| BA150155 | Końcówka do piaskowania BAC5B do leczenia poddziąstowego |
| BA150160 | Końcówka ultradźwiękowa BAC5L |
| BA150160 | Końcówki jednorazowego użytku (opakowanie 10 szt.) (Końcówki do piaskowania poddziąstowego) |

*Skala twardości minerału - miara względnej odporności na zarysowania, mierzona poprzez zarysowanie minerału inną substancją o znanej twardości w skali twardości Mohsa.



MOC

WYDAJNOŚĆ

PRECYZJA



ULTICLEAN 500L



SPEC. DS. PRODUKTÓW BA INTERNATIONAL

Agnieszka Gromadzka | +48 668 526 701 | agnieszka.gromadzka@marrodent.pl