



ULTICLEAN 500L



Skaler dentystyczny + Piaskarka

MOC



WYDAJNOŚĆ



PRECYZJA





ULTICLEAN 500L

Nowoczesne podejście do profilaktyki
przy minimalnie inwazyjnych zabiegach
piaskowania i skalingu.

+ PIASKOWANIE

+ LECZENIE PRZYŻĘBIA

+ LECZENIE ENDODONTYCZNE



+ KONSERWACJA IMPLANTÓW

+ SKUTECZNE I WYGODNE USUWANIE
PŁYTKI NAZĘBNEJ

Precyzyjna technologia

Dostarczanie preferowanego protokołu
zdrowia jamy ustnej



ULTICLEAN
500L


Eliptyczna wibracja

Eliptyczna trajektoria drgań umożliwia pracę pod kątem 0° między końcówką a powierzchnią zęba, zapewniając efekt polerowania. Powoduje to rozproszenie siły uderzenia między końcówką a zębami w celu uzyskania bardziej komfortowego efektu skalingu.

Osiągnij

360°

precyzyjny
skaling

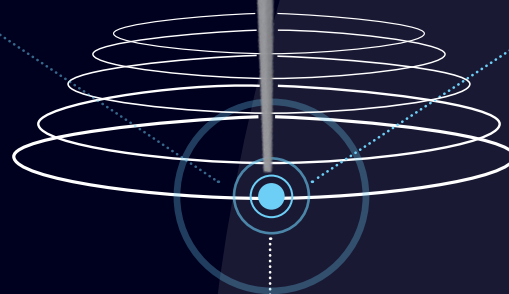

Końcówka ze stopu Tytanu



Ultradźwiękowe leczenie przyzębia

WIDOK	KOD PRODUKTU	ROZM.	TYP PROCEDURY	OPIS
	BA150180	BAC33E	Okołozębowa	Do usuwania kamienia nazębnego znajdującego się głęboko w kieszonce przyzębnej.
	BA150181	BAC50RE	Okołozębowa	Do skalingu poddziąsłowego.
	BA150182	BAC50LE Tips	Okołozębowa	Do skalingu poddziąsłowego.
	BA150184	BAC59E	Okołozębowa	Do skalingu poddziąsłowego.
	BA150183	BAC52E	Skaling	Do skalingu naddziąsłowego Usuwanie kamienia nazębnego i płytki nazębnej.
	BA150185	BAC56E Tip	Skaling	Do skalingu naddziąsłowego Usuwanie silnego kamienia.
	BA150195	BAC60E Tips	Endodoncja	Do irygacji kanałów korzeniowych.
	BA150196	BAC62E Tips	Endodoncja	Do irygacji kanałów korzeniowych.
	BA150188	BAC90E Tips	Implant	Do czyszczenia implantów.
	BA150186	BAC94E Tips	Implant	Do czyszczenia implantów.
	BA150187	BAC95E Tips	Implant	Do czyszczenia implantów.

Skaling ultradźwiękowy naddziąsłowy i poddziąsłowy z eliptycznym torem drgań rozprasza siłę uderzenia między końcówką a zębami.

Twardość końcówki ze stopu tytanu jest niższa niż cementu i szkliva, więc ząb nie ulega uszkodzeniu.

Air - polishing

Piaskowanie to proces polegający na użyciu sprężonego powietrza do precyzyjnego dostarczania proszku i wody na powierzchnię zęba w celu usunięcia substancji przylegających do powierzchni zęba (takich jak płytka nazębna, pigment, biofilm itp.).

Gama proszków Ulticlean obejmuje proszek perio, który umożliwia czyszczenie poddziąsłowe, co pomaga chronić powierzchnię tkanek miękkich.

Skuteczne i komfortowe leczenie sprawia, że jest to przyjemniejsze doświadczenie dla pacjentów.

Piaskowanie jest mniej szkodliwe dla szkliwa zębów przy minimalnym ścieraniu w porównaniu z konwencjonalnymi technikami skalingu i polerowania.

Dokładne usuwanie płytki nazębnej


Piaskowanie może osiągnąć znaczący efekt na powierzchni okluzyjnej, powierzchni przylegającej, zamkach ortodontycznych i innych trudnych do czyszczenia obszarach.

Zmniejszenie przyczepności płytki nazębnej i odbarwień

Po skalingu ultradźwiękowym lub ręcznym pacjenci mogą odczuwać, że powierzchnia zębów jest szorstka i nierówna.

Główną funkcją polerowania powietrzem jest polerowanie i czyszczenie powierzchni zębów.

Po polerowaniu powierzchnia zębów jest gładsza i czystsza, dzięki czemu płytka nazębna i pigment mają mniejsze szanse na przyleganie do zębów.

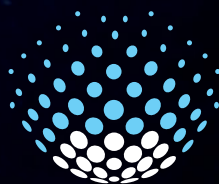

ULTICLEAN
500L



Kontrola



Piaskowanie **Poddziąsłowe**

Skutecznie kontroluje stany zapalne naturalnych zębów / tkanek miękkich / zakażeń okołowszczepowych.

W porównaniu z tradycyjnym skalingiem Piaskowanie może lepiej oczyścić powierzchnię zęba, a także powierzchnię implantów.



ULTICLEAN
500L

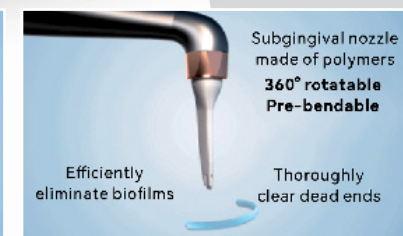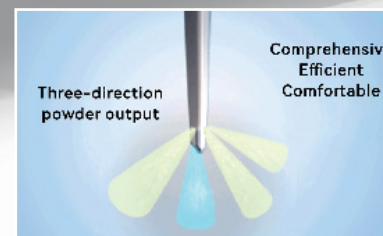



Kontrola płytki nazębnej

Dysza małego kalibru
zapewnia bardziej precyzyjne
piaskowanie i skuteczniejsze
usuwanie płytki nazębnej.



ZEWNĘTRZNE: WODA


Regulacja mocy i ilości wody.

ZEWNĘTRZNE: WODA


Zapewnia ochronę i ciepłą wodę.

WEWNĘTRZNE:

Sprężone powietrze i piasek.
Usuwa pigmenty, płytkę nazębną,
biofilm i wczesny kamień nazębny.

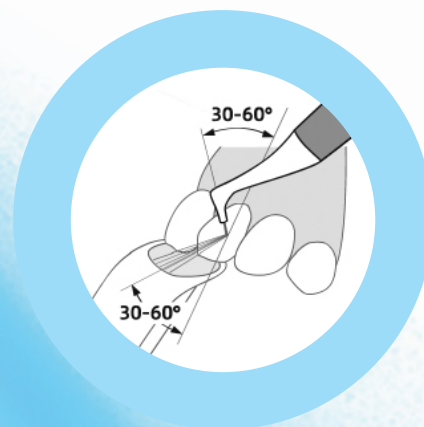

Zalecany kąt
30° - 60°

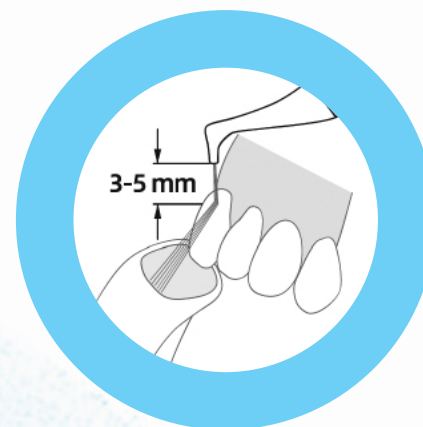

Zalecana odległość
robocza 3 - 5 mm

Specjalnie zaprojektowany kompletny system wózków do urządzenia Ulticlean UC500L zapewnia większą higienę i wydajność.

Kompaktowa i unikalna konstrukcja

Elegancki i wydajny system zarządzania kablami pozwala na stworzenie niezwykle higienicznego i funkcjonalnego stanowiska pracy.

Płynny ruch - 360


Dzięki wysokiej jakości systemowi kół, nasz wózek został zaprojektowany tak, aby zapewnić najlepszą zwrotność w przestrzeni roboczej.

Ergonomiczny

Efektywne zarządzanie przestrzenią dzięki przednim otworom do przechowywania zapewnia łatwy dostęp do piasków.


Od przodu:

826,5 mm wysokości x 330 mm szerokości na dole x 220 mm szerokości na górze

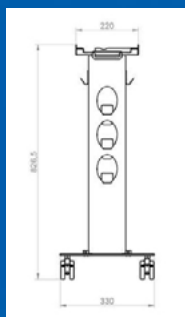

Z boku:

826,5 mm wysokości x 361 mm szerokości na dole x 286 mm szerokości na górze

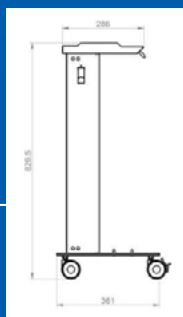

Wymiary

WÓZEK - BA150300





ULTRACLEAN
500L

Simple + sophisticated



Tryb bez wody



Tryb zwiększonej mocy



Tryb płukania




Standardowy tryb pracy

Wielofunkcyjny sterownik nożny

Podwójne zasilanie wodą

Wyposażone w dwa pojemniki na wodę (600 ml, 1400 ml) wykonane z materiałów antykorozyjnych, w których można używać specjalne płyny, takie jak chlorheksydyna, nadtlenek wodoru i podchloryn sodu. Dostępne jest również zewnętrzne źródło wody. Urządzenie do podgrzewania wody sprawia, że zabieg jest komfortowy dla pacjenta.



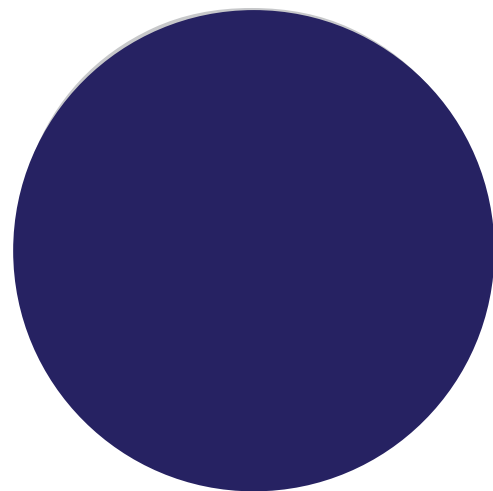

o n

OD WYDAJNOŚCI PO KOMFORT




ULTRACLEAN
500L

Wszystko, czego potrzebujesz jednym pakiecie:

B.A. International jest jedną z największych firm zajmujących się tego typu działalnością w Europie.

Zintegrowaliśmy najnowsze technologie polerowania ultradźwiękowego i powietrznego w jednym urządzeniu, dzięki czemu możemy skutecznie eliminować biofilm, zmniejszając w ten sposób konieczność ręcznego i mechanicznego przyrządowania.

- Urządzenie UC500L
- 4 rękojeści
- 14 końcówek w zestawie
- 2 pojemniki do piasku
- Profesjonalna usługa montażu
- 2 lata gwarancji
- Zestaw obejmuje również:
klucz dynamometryczny, pojemniki do sterylizacji, igła czyszcząca, złącza kompresora i części zamienne.

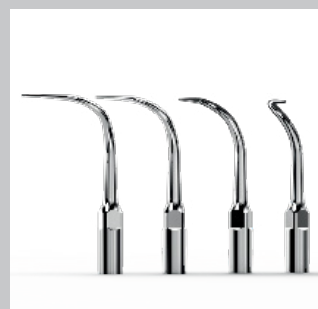

pakiet


BA Ulticlean Profilaktyka

seria Piasków

PIASEK STOMATOLOGICZNY HENRY SCHEIN 250g
(Do stosowania naddziąsłowego).

**PIASEK STOMATOLOGICZNY HENRY SCHEIN
ACCLEAN AIR POLISHING POWDER PERIO PLUS**
(Do stosowania pod- i naddziąsłowego).

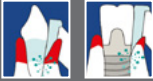

		STANDARD	STANDARD	PERIO PLUS
KOD PRODUKTU		5723827	5723828	9883899
SMAK		CYTRYNA	MIĘTA	NEUTRALNY
BAZA SUROWCOWA		WODOROWĘGLAN SODU	WODOROWĘGLAN SODU	TAGATOZA
ROZMIAR CZĄSTEK Ø		40 µM	40 µM	15 µM
pH		W 20 °C: 8,1-8,4	W 20 °C: 8,1-8,4	(10 G/L) W 20°C: 6-8
ZĄB	PRZEBARWIENIA	✓	✓	✓
	SZKLIWO	✓	✓	✓
	BIĄŁE PLAMY NA SZKLIWIE	✓	✓	✓
	ZĘBINA	✓	✓	✓
DZIAŚŁO	DZIAŚŁO	✓	✓	✓
	JĘZYK I PODNIEBIENIE	✓	✓	✓
ODNOWA	KOMPOZYT HYBRYDOWY	✓	✓	✓
	MATERIAŁY JONOMEROWE	✓	✓	✓
IMPLANT	IMPLANT I ZAPALENIE BŁONY ŚLUZOWEJ	✓	✓	✓
ORTODONCJA	ZAMKI I AKCESORIA	✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓
		✓	✓	✓

Łatwa do rozłożenia konstrukcja rękojeści umożliwia szybsze czyszczenie i zapobiega blokowaniu się piasku.

Akcesoria

Sterylizator do zestawu piaskowania

do sterylizacji i przechowywania rękojeści do piaskownia i igieł czyszczących.

Metalowy pojemnik

do sterylizacji i przechowywania rękojeści ultradźwiękowej, klucza i końcówek roboczych.

Walizka

do przechowywania wszystkich urządzenia i akcesoriów UC500L.



Ulticlean 500L
- procedura instalacji

Łatwiejsze czyszczenie



MATERIAŁ	GLICyna	ZĘBINA	ERYTRYTOL	WODOROWĘGLAN SODU	SZKLIWO
MOHS*	2	2 - 2.5	2.5	2.5	4.5

Konfiguracja standardowa

RĘKOJEŚĆ ULTRADŹWIĘKOWA BAC5L	x2	POJEMNIK DO STERYLIZACJI	x3	ZBIORNIK PIASKU	x2
RĘKOJEŚCI DO PIASKOWANIA (BAC5P x 1) (BAC5B x 1)	x2	POJEMNIK DO WODY	x2	RURKA WODNA / RURKA POWIETRZNA	x2
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY	x2	WIELOFUNKCYJNY STEROWNIK NOŻNY	x1		

Wybór końcówek ultradźwiękowych obejmuje:

BAC33E / BAC50RE / BAC50LE / BAC59E / BAC56E / BAC60E / BAC62E	x2
BAC94E / BAC95E	x1

KOD PRODUKTU

BA150100	Skalero - Piaskarka UC500L
BA150150	Rękojeść do piaskowania BAC5P do leczenia naddziąstowego
BA150155	Rękojeść do piaskowania BAC5B do leczenia poddziąstowego
BA150160	Rękojeść ultradźwiękowa BAC5L
BA150170	Końcówki jednorazowego użytku (opakowanie 10 szt.) (Końcówki do piaskowania poddziąstowego)

*Skala twardości minerału - miara względnej odporności na zarysowania, mierzona poprzez zarysowanie minerału inną substancją o znanej twardości w skali twardości Mohsa.



MOC

WYDAJNOŚĆ

PRECYZJA



ULTICLEAN
500L



SPEC. DS. PRODUKTÓW BA INTERNATIONAL

Agnieszka Gromadzka | +48 668 526 701 | agnieszka.gromadzka@marrodent.pl